

## エスアイ・メッシュ

再使用禁止

### 【禁忌・禁止】

再使用禁止

### 【形状・構造及び原理等】


#### 1. 種類

種類	サイズ
3号	75mm×75mm
5号	100mm×100mm
7号	100mm×200mm
10号	200mm×300mm
11号	300mm×350mm

#### 2. 形状・構造

本品は湿潤した創面には非固着性を示し、皮膚には密着性を示すシリコンゲルを、メッシュ状の基材に多孔となるように塗布した非固着性創傷被覆・保護材です。本品は1枚ずつ滅菌包装されています。

<構造図>

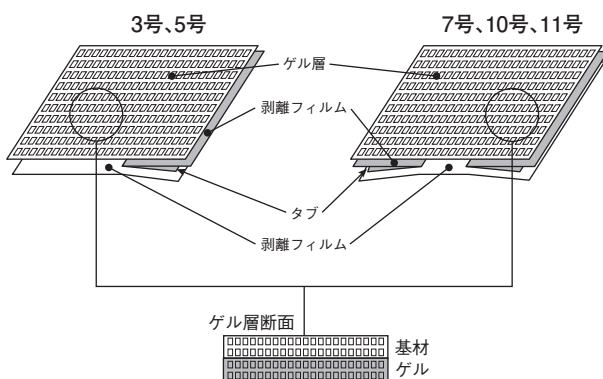

ゲル層	組成	
	基材	ポリエステル
	ゲル	シリコンゲル
剥離フィルム	ポリプロピレン	

#### 3. 原理

多孔となるように塗布されたシリコンゲルは湿潤した創面には非固着性を有します。創からの血液・滲出液等は本品の孔を通過し二次ドレッシングで吸収します。

### 【使用目的又は効果】

創部の保護及び固着防止に用いること。

### 【使用方法等】

#### 1. 貼付前

- 1) 本品貼付部を清拭、洗浄し、必要に応じて消毒を行います。
- 2) 創周囲を十分乾燥させます。
- 3) 創を十分に覆うことができる適切なサイズを選択します。

#### 2. 貼付

- 1) 本品の剥離フィルムのタブを持ち、ゲル面に手が触れないように剥離フィルムを剥がし、創部に貼付します。
- 2) 本品の上に適当なサイズの滅菌済みの吸収用ガーゼ等を重ねます。
- 3) 粘着テープや包帯等の適当な手段で固定します。

#### —注意—

本品は防水機能を有さないため、シャワー、入浴をする場合には、必要に応じて二次ドレッシングの上から防水テープ等で被覆してください。

#### 3. 交換

- 1) 滲出液の量と創の状態を考慮し、必要に応じて交換します。
- 2) 皮膚を押さえながら本品をゆっくりと剥がします。
- 3) 本品が創面に固着しているときは、蒸留水又は生理食塩水で固着した部分を湿らせ柔らかくしてから剥がします。

### 【使用上の注意】

#### 1. 重要な基本的注意

- 1) 本品使用中に発赤、びらん、そう痒等の皮膚障害と思われる症状が現れた場合は、本品の使用を中止し、適切な処置を行うこと。
- 2) 創面に臨床的感染、又はそのおそれがある場合は、頻りに観察し、適切な処置を行うこと。又、全身状態が悪い場合は特に注意して使用すること[症状を悪化させるおそれがある]。
- 3) 使用中は観察を十分に行うこと。又、原則として30日を超える長期使用は行わないこと。

#### 2. 不具合・有害事象

- 一般的な創傷被覆・保護材の使用における「不具合・有害事象」
- ・創の感染症状
  - ・創傷及び周囲の皮膚障害(表皮剥離、浸軟、浮腫、水疱、発赤、びらん、そう痒、アレルギー、接触性皮膚炎)
  - ・固着
  - ・壊死組織の増加
  - ・疼痛

#### 3. その他の注意

- 1) 滅菌包装が汚損又は破損している場合及びそのおそれがある場合には使用しないこと。
- 2) 滅菌包装を開封したら直ちに使用すること。
- 3) 植皮創において、植皮が生着する前に本品を交換すると、植皮が剥がれるおそれがあるため、植皮が生着するのを待って本品を交換すること。
- 4) 貼付状況を観察し、滲出液の漏れ、周囲の剥がれ等が起きたとき又は起きそうときは、速やかに新しい本品と交換すること。

### 【保管方法及び有効期間等】

#### 1. 保管方法

水濡れ、直射日光及び高温多湿を避け、室温で保管すること。

#### 2. 有効期間

パッケージに表示

(自己認証データによる)

**【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】**

**1. 製造販売業者**

アルケア株式会社

**2. 連絡先**

〒130-0013 東京都墨田区錦糸1-2-1 アルカセントラル19階

お客様相談室：☎ 0120-770-175