

ALCARE 造口护理产品目录



每个造口患者都希望能轻松舒适地生活，为满足这个愿望，日本ALCARE公司作为医疗护理产品及服务的提供者，研发、生产、提供适合亚洲人特点的，满足各种生活场景的造口护理产品，并同时提供相应的护理理念。

ALCARE公司的造口产品发展史

- 1965年 ● 研发上市日本最初的粘贴性一件式造口产品Lapack系列
- 1979年 ● 推出含皮肤保护剂的一件式造口产品Pospack系列
- 1982年 ● 推出高耐久性含皮肤保护剂的尿路造口产品Biourine系列
- 1985年 ● 推出日本最初的两件式造口产品Biomax系列
- 1991年 ● 推出含刺梧桐树胶皮肤保护剂造口产品Procure系列
- 1998年 ● 推出含刺梧桐树胶皮肤保护剂造口产品Youcare系列
- 2001年 ● 推出回肠造口专用一件式造口产品Ilfine系列
- 2008年 ● 推出含神经酰胺皮肤护理精华成分的造口产品Cellcare系列
- 2017年 ● 推出含神经酰胺成分防漏环、防漏条Cellcare-Soft Wafer系列

目录 INDEX

3个产品系列的介绍

Cellcare 系列	3
Youcare 系列	3
Procure 系列	3

肠造口护理用品

Cellcare 选择指南	5
Youcare 选择指南	7
Procure 选择指南	8

Cellcare	9
Youcare	13
Procure	17

其它

Ilfine	20
Pospack	21
Lapack	22

尿路造口护理用品

Cellcare 选择指南	24
Youcare 选择指南	25
Procure 选择指南	25

Cellcare	26
Youcare	28
Procure	30

附件用品

附加用品	32
------	----

灌洗器配套用品

灌洗器配套用品	38
---------	----

		Cellcare 系列 保持皮肤健康的精华款	Youcare 系列 注重便捷使用的标准款	Procare 系列 性价比良好的经济款
底盘		<p>含有护理成分的皮肤保护剂 皮肤保护剂里含有皮肤护理成分神经酰胺，能更好地减轻更换造口袋时的剥离刺激。两件式带防污沿的设计也能起到防止皮肤污染，从而达到保持皮肤健康的效果。</p> <p>柔软贴附无异物感 中心厚度1.5mm，外缘则为0.3mm超薄。粘贴后不久与自己的皮肤紧密贴合。</p>	<p>天然刺梧桐树胶皮肤保护剂 对皮肤温和的天然素材“刺梧桐树胶 + 柑橘果胶”。通过调整成分和厚度，分为用于短期更换的一件式和中长期更换的两件式，从而满足不同患者的需要。</p> <p>可对应不同尺寸的造口 预裁剪型产品系列的有效开口直径参数以3~5mm的细小间隔变化，最大可用于直径为49mm的造口。随意开孔型最大有效开口可达64mm。</p>	<p>天然刺梧桐树胶皮肤保护剂 对皮肤温和的天然素材“刺梧桐树胶 + 柑橘果胶”。天然刺梧桐树胶温和不刺激，本身具备将强碱性粪便中和至弱酸性的能力，满足皮肤护理的弱酸性原则。</p> <p>底盘周围的加固胶带防止外部液体对皮肤保护剂的腐蚀 底盘的加固胶带 (Procare 2F 和小儿底盘除外)可增加底盘贴附性能，使患者更安心。</p>
造口袋		<p>具有高度除臭效果、可恢复通气的过滤器 采用高性能过滤器，即使堵塞，只需用手指挤压2~3次，即可恢复通气功能。无需担心袋体鼓气及气味泄漏。</p> <p>具有可满足所有造口患者的不同排放口 针对不同类型造口患者，具有不同开口类型的造口产品</p>	<p>防止气味泄漏 含碳薄膜过滤器 过滤器内侧具有透气防水薄膜。除臭效果好，无泄漏，防“涨袋”。</p> <p>易操作的排放口 便排放口的反折线和双开关尿管排放口的盖子都采用了醒目的蓝色。</p>	<p>有肉色及透明的造口袋可供选择 透明型容易观察排泄物性状；肉色型不易发觉，以便保护患者隐私。</p> <p>带观察小窗的不透明造口袋 保护隐私的同时可通过观察窗来查看造口及排泄物情况。</p>
造口种类	肠造口	造口护理用品 参照选择指南 P5	造口护理用品 参照选择指南 P7	造口护理用品 参照选择指南 P8
	尿路造口	造口护理用品 参照选择指南 P24	造口护理用品 参照选择指南 P24	造口护理用品 参照选择指南 P24

肠造口护理用品

一件式/两件式

图示说明

底盘 (腹部贴附部分)

反映底盘的特征

- 平面底盘** 整体为平面 适用于有高度的造口
- 微凸底盘** 底盘具有贴附性和顺从性，柔软，不易造成压迫损伤
- 凸面底盘** 底盘内侧凸出，适用于没有高度的造口


造口袋 (蓄积排泄物)

反映造口袋的形状和特征

- 下部排放口魔术贴型** 下部为魔术贴式的排放口
- 下部排放口封口夹型等** 用封口夹或橡皮筋关闭下部排放口
- 闭口型** 无排放口
- 水状便排放口** 开关排放口，用于泥状或水状便
- 上部开放型** 上部有排放口的

随意开孔型 按照造口的大小，可剪裁开口的底盘类型

预裁剪型 产品制造时设置的开口，省去了开孔的时间

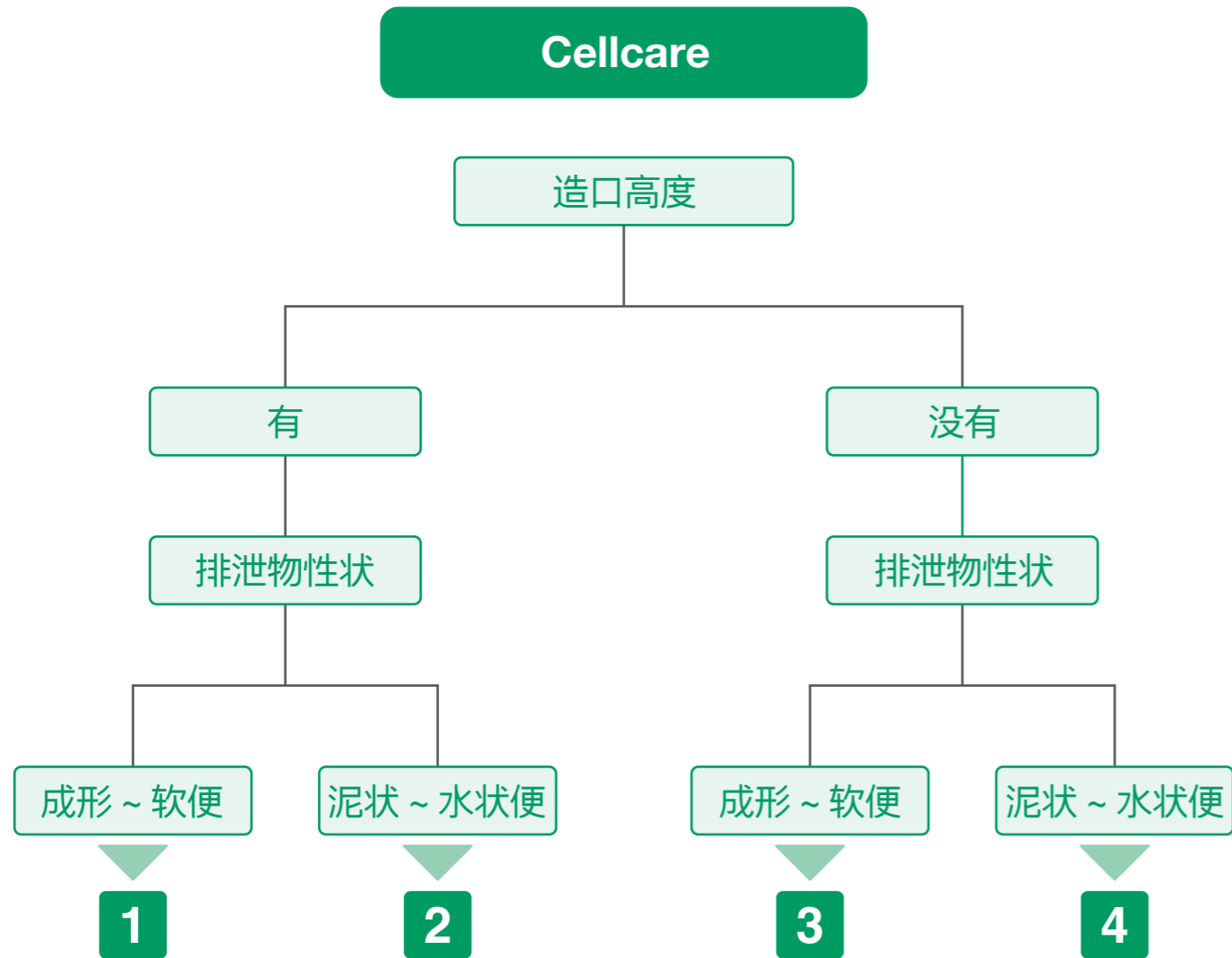

造口袋系列选择指南 (Cellcare)

1	◇造口高度 : 有 ◇排泄物性状 : 成形~软便
Cellcare 1-TD	平面底盘 下部排放口魔术贴型 预载剪型 随意开孔型
Cellcare 1-TDs	微凸底盘 下部排放口魔术贴型 随意开孔型
Cellcare 1-C	平面底盘 闭口型 随意开孔型
Cellcare 2-F+TDf	平面底盘 下部排放口魔术贴型 预载剪型 随意开孔型
Cellcare 2-F+Cf	平面底盘 闭口型 预载剪型 随意开孔型

2	◇造口高度 : 有 ◇排泄物性状 : 泥状~水状便
Cellcare 1-D Cap	平面底盘 水状便排出口 预载剪型 随意开孔型
Cellcare 1-Ds Cap	微凸底盘 水状便排出口 随意开孔型
Cellcare 2-F+D Cap	平面底盘 水状便排出口 预载剪型 随意开孔型

3	◇造口高度 : 没有 ◇排泄物性状 : 成形~软便
Cellcare 1-TDc	凸面底盘 下部排放口魔术贴型 预载剪型 随意开孔型
Cellcare 2-Fc+TDf	凸面底盘 下部排放口魔术贴型 预载剪型
Cellcare 2-Fc+Cf	凸面底盘 闭口型 预载剪型

4	◇造口高度 : 没有 ◇排泄物性状 : 泥状~水状便
Cellcare 1-Dc Cap	凸面底盘 水状便排出口 预载剪型 随意开孔型
Cellcare 2-Fc+D Cap	凸面底盘 水状便排出口 预载剪型

Youcare

造口高度

有

1

没有

2

造口袋系列选择指南 (Youcare)

1	◇造口高度 : 有 ◇排泄物性状 : 成形 ~ 软便
Youcare-TD	平面底盘 下部排放口魔术贴型 预载剪型 随意开孔型
Youcare-TDs	微凸底盘 下部排放口魔术贴型 随意开孔型
Youcare-D	平面底盘 下部排放口封口夹型等 随意开孔型
Youcare-C	平面底盘 闭口型 预载剪型 随意开孔型
Youcare 2-F+TDf	平面底盘 下部排放口魔术贴型 预载剪型 随意开孔型
Youcare 2-F+Df	平面底盘 下部排放口封口夹型等 预载剪型 随意开孔型
Youcare 2-F+Cf	平面底盘 闭口型 预载剪型 随意开孔型

2	◇造口高度 : 没有 ◇排泄物性状 : 成形 ~ 软便
Youcare-TDc	凸面底盘 下部排放口魔术贴型 预载剪型
Youcare-Dc	凸面底盘 下部排放口封口夹型等 预载剪型
Youcare-Cc	凸面底盘 闭口型 预载剪型
Youcare 2-Fc+TDf	凸面底盘 下部排放口魔术贴型 预载剪型
Youcare 2-Fc+Df	凸面底盘 下部排放口封口夹型等 预载剪型
Youcare 2-Fc+Cf	凸面底盘 闭口型 预载剪型

Procare

造口高度

有

1

没有

2

造口袋系列选择指南 (Procure)

1	◇造口高度 : 有 ◇排泄物性状 : 成形 ~ 软便
Procure-D	平面底盘 下部排放口封口夹型等 预载剪型 随意开孔型
Procure-C	平面底盘 闭口型 预载剪型 随意开孔型
Pediatric Procure-Post OP	平面底盘 下部排放口封口夹型等 随意开孔型
Pediatric Procure-D	平面底盘 下部排放口封口夹型等 随意开孔型
Procure 2-F+D	平面底盘 下部排放口封口夹型等 随意开孔型
Procure 2-F+C	平面底盘 闭口型 随意开孔型
Procure 2-Fa+D	平面底盘 下部排放口封口夹型等 随意开孔型
Procure 2-Fa+C	平面底盘 闭口型 随意开孔型

2	◇造口高度 : 没有 ◇排泄物性状 : 成形 ~ 软便
Procure-Dc	凸面底盘 下部排放口封口夹型等 预载剪型
Procure 2-Fc+D	凸面底盘 下部排放口封口夹型等 预载剪型
Procure 2-Fc+C	凸面底盘 闭口型 预载剪型

Cellcare 1-TD

一件式造口系统

特征

- 魔术贴型，操作简便
- 采用了“可恢复通气的过滤器”防止气味和便渗漏，过滤器堵塞时可再通
- 一件式造口袋，操作简捷



平面底盘
下部排放口魔术贴型
预载剪型
随意开孔型

种类	商品编号	规格			数量 / 盒
		开口大小	造口有效直径	袋子尺寸 (长 × 宽)	
肉色	19421	20mm \emptyset	14~49mm (随意开孔)	300mm×150mm	10个
20 随意开孔	18701	20mm \emptyset	14~49mm (随意开孔)	300mm×150mm	10个
25	18702	25mm \emptyset	19~24mm	300mm×150mm	10个
30	18703	30mm \emptyset	24~29mm	300mm×150mm	10个
35	18704	35mm \emptyset	29~34mm	300mm×150mm	10个
40	18705	40mm \emptyset	34~39mm	300mm×150mm	10个
70 随意开孔	18706	10mm \emptyset	4~69mm	300mm×150mm	5个

Cellcare 1-TDs

一件式造口系统

特征

- 魔术贴型，操作简便
- 采用了“可恢复通气的过滤器”防止气味和便渗漏，过滤器堵塞时可再通
- 一件式微凸底盘造口袋，舒适防漏



微凸底盘
下部排放口魔术贴型
随意开孔型

种类	商品编号	规格			数量 / 盒
		开口大小	造口有效直径	袋子尺寸 (长 × 宽)	
30 随意开孔	20151	15mm \emptyset	14~29mm	300mm×150mm	5个
40 随意开孔	20152	25mm \emptyset	24~39mm	300mm×150mm	5个
50 随意开孔	20153	35mm \emptyset	34~49mm	300mm×150mm	5个

Cellcare 1-TDc

一件式造口系统

特征

- 魔术贴型，操作简便
- 采用了“可恢复通气的过滤器”防止气味和便渗漏，过滤器堵塞时可再通
- 一件式凸面底盘造口袋，防漏效果好



凸面底盘
下部排放口魔术贴型
预载剪型
随意开孔型

种类	商品编号	规格			数量 / 盒
		开口大小	造口有效直径	袋子尺寸 (长 × 宽)	
22	18711	22mm \emptyset	18~21mm	300mm×150mm	5个
25	18712	25mm \emptyset	21~24mm	300mm×150mm	5个
28	18713	28mm \emptyset	24~27mm	300mm×150mm	5个
32	18714	32mm \emptyset	27~31mm	300mm×150mm	5个
36	18715	36mm \emptyset	31~35mm	300mm×150mm	5个
40	18716	40mm \emptyset	35~39mm	300mm×150mm	5个
45	18717	45mm \emptyset	39~44mm	300mm×150mm	5个
50	18718	50mm \emptyset	44~49mm	300mm×150mm	5个
45 随意开孔	20141	15mm \emptyset	29~44mm	300mm×150mm	5个
55 随意开孔	20142	25mm \emptyset	39~54mm	300mm×150mm	5个

Cellcare 1-D Cap

一件式造口系统

特征

- 柔软排放口，适用于水状便或泥状便，挤压即可将便排出
- 采用了“可恢复通气的过滤器”防止气味和便渗漏，过滤器堵塞时可再通



平面底盘
水状便排出口
预载剪型
随意开孔型

种类	商品编号	规格			数量 / 盒
		开口大小	造口有效直径	袋子尺寸 (长 × 宽)	
肉色	19431	20mm \emptyset	14~49mm (随意开孔)	346mm×148mm	10个
20 随意开孔	18921	20mm \emptyset	14~49mm (随意开孔)	346mm×148mm	10个
25	18922	25mm \emptyset	19~24mm	346mm×148mm	10个
30	18923	30mm \emptyset	24~29mm	346mm×148mm	10个
35	18924	35mm \emptyset	29~34mm	346mm×148mm	10个
40	18925	40mm \emptyset	34~39mm	346mm×148mm	10个
70 随意开孔	18926	10mm \emptyset	4~69mm (随意开孔)	346mm×148mm	10个

Cellcare 1-Ds Cap

一件式造口系统

特征

- 柔软排放口，适用于水状便或泥状便，挤压即可将便排出
- 采用了“可恢复通气的过滤器”防止气味和便渗漏，过滤器堵塞时可再通
- 为微凸底盘，舒适防漏



微凸底盘
水状便排出口
随意开孔型

种类	商品编号	规格			数量 / 盒
		开口大小	造口有效直径	袋子尺寸 (长 × 宽)	
30 随意开孔	20131	15mm \emptyset	14~29mm	346mm×148mm	5个
40 随意开孔	20132	25mm \emptyset	24~39mm	346mm×148mm	5个
50 随意开孔	20133	35mm \emptyset	34~49mm	346mm×148mm	5个

Cellcare 1-Dc Cap

一件式造口系统

特征

- 柔软排放口，适用于水状便或泥状便，挤压即可将便排出
- 采用了“可恢复通气的过滤器”防止气味和便渗漏，过滤器堵塞时可再通
- 凸型底盘，防漏效果好



凸面底盘
水状便排出口
预载剪型
随意开孔型

种类	商品编号	规格			数量 / 盒
		开口大小	造口有效直径	袋子尺寸 (长 × 宽)	
22	18931	22mm \emptyset	18~21mm	346mm×148mm	5个
25	18932	25mm \emptyset	21~24mm	346mm×148mm	5个
28	18933	28mm \emptyset	24~27mm	346mm×148mm	5个
32	18934	32mm \emptyset	27~31mm	346mm×148mm	5个
36	18935	36mm \emptyset	31~35mm	346mm×148mm	5个
40	18936	40mm \emptyset	35~39mm	346mm×148mm	5个
45 随意开孔	18937	15mm \emptyset	29~44mm	346mm×148mm	5个
55 随意开孔	18938	25mm \emptyset	39~54mm	346mm×148mm	5个

Cellcare 1-C

一件式造口系统

特征

- 采用了“可恢复通气的过滤器”防止气味和便渗漏，过滤器堵塞时可再通
- 一件式闭口造口袋，操作简捷



平面底盘
闭口型
随意开孔型

种类	商品编号	规格			数量 / 盒
		开口大小	造口有效直径	袋子尺寸 (长 × 宽)	
20 随意开孔	18691	20mm \emptyset	14~49mm (随意开孔)	210mm×150mm	10个

Cellcare 肠道口护理用品

Youcare 肠道口护理用品

Procare 肠道口护理用品

其它 肠道口护理用品

Cellcare 尿路造口护理用品

Youcare 尿路造口护理用品

Procare 尿路造口护理用品

附件用品

灌洗器配套用品

灌洗器配套用品

Cellcare 2-F

两件式造口系统

- 特征**
- 柔软而薄的皮肤保护剂，使底盘柔顺地贴附到肌肤上
 - 容易接合的嵌合环，造口袋和底盘嵌合时，无需目视也可轻松接合



平面底盘
预载剪型
随意开孔型

种类	商品编号	规格				数量 / 盒
		开口大小	造口有效直径	底盘尺寸	对应造口袋	
M 随意开孔	18251	10mm ϕ	4~39mm (随意开孔)	88mm \times 88mm	M	5个
M16	18661	16mm ϕ	12~15mm	88mm \times 88mm	M	5个
M19	18662	19mm ϕ	15~18mm	88mm \times 88mm	M	5个
M22	18252	22mm ϕ	18~21mm	88mm \times 88mm	M	5个
M25	18253	25mm ϕ	21~24mm	88mm \times 88mm	M	5个
M28	18254	28mm ϕ	24~27mm	88mm \times 88mm	M	5个
L 随意开孔	18255	10mm ϕ	4~49mm (随意开孔)	98mm \times 98mm	L	5个
L32	18256	32mm ϕ	27~31mm	98mm \times 98mm	L	5个
L36	18257	36mm ϕ	31~35mm	98mm \times 98mm	L	5个
L40	18258	40mm ϕ	35~39mm	98mm \times 98mm	L	5个
LL 随意开孔	18259	10mm ϕ	4~69mm (随意开孔)	118mm \times 118mm	LL	5个

Cellcare 2-Df

两件式造口系统

- 特征**
- 采用了“可恢复通气的过滤器”防止气味和便渗漏，过滤器堵塞时可再通
 - 造口袋嵌合部有防污沿设计，底盘侧的嵌合部位不易沾上排泄物



下部排放口
封口夹型等

种类	商品编号	规格		数量 / 盒
		袋子尺寸 (长 \times 宽)		
M	18271	300mm \times 150mm		10个
L	18272	300mm \times 150mm		10个
LL	18273	300mm \times 150mm		10个

Cellcare 2-D Cap

两件式造口系统

- 特征**
- 柔软排放口，适用于水状便或泥状便，挤压即可将便排出
 - 采用了“可恢复通气的过滤器”防止气味和便渗漏，过滤器堵塞时可再通



水状便
排出口

种类	商品编号	规格		数量 / 盒
		袋子尺寸 (长 \times 宽)		
透明	M	18911	346mm \times 148mm	10个
	L	18912	346mm \times 148mm	10个
	LL	18913	346mm \times 148mm	10个
肉色	M	19441	346mm \times 148mm	10个
	L	19442	346mm \times 148mm	10个

Cellcare 2-Fc

两件式造口系统

- 特征**
- 柔软而薄的皮肤保护剂，使底盘柔顺地贴附到肌肤上
 - 容易接合的嵌合环，造口袋和底盘嵌合时，无需目视也可轻松接合
 - 如需提高底盘的贴附性，可使用固定腰带 II (P35)



凸面底盘
预载剪型

种类	商品编号	规格				数量 / 盒
		开口大小	造口有效直径	底盘尺寸	对应造口袋	
M13	18387	13mm ϕ	9~12mm	100mm ϕ	M	5个
M16	18388	16mm ϕ	12~15mm	100mm ϕ	M	5个
M19	18389	19mm ϕ	15~18mm	100mm ϕ	M	5个
M22	18381	22mm ϕ	18~21mm	100mm ϕ	M	5个
M25	18382	25mm ϕ	21~24mm	100mm ϕ	M	5个
M28	18383	28mm ϕ	24~27mm	100mm ϕ	M	5个
L32	18384	32mm ϕ	27~31mm	110mm ϕ	L	5个
L36	18385	36mm ϕ	31~35mm	110mm ϕ	L	5个
L40	18386	40mm ϕ	35~39mm	110mm ϕ	L	5个

Cellcare 2-Cf

两件式造口系统

- 特征**
- 采用了“可恢复通气的过滤器”防止气味和便渗漏，过滤器堵塞时可再通
 - 造口袋嵌合部有防污沿设计，底盘侧的嵌合部位不易沾上排泄物



闭口型

种类	商品编号	规格		数量 / 盒
		袋子尺寸 (长 \times 宽)		
M	18281	210mm \times 150mm		10个
L	18282	210mm \times 150mm		10个

Cellcare 2-TDf

两件式造口系统

- 特征**
- 魔术贴型，操作简便
 - 采用了“可恢复通气的过滤器”防止气味和便渗漏，过滤器堵塞时可再通
 - 造口袋嵌合部有防污沿设计，底盘侧的嵌合部位不易沾上排泄物



下部排放口
魔术贴型

种类	商品编号	规格		数量 / 盒
		造口有效直径		
透明	M	18261	300mm \times 150mm	10个
	L	18262	300mm \times 150mm	10个
	LL	18263	300mm \times 150mm	10个
肉色	M	18671	300mm \times 150mm	10个
	L	18672	300mm \times 150mm	10个

Youcare-TD

一件式造口系统

特征

- 魔术贴型，操作简便
- 底盘内使用了柔顺而经久耐用的薄型皮肤保护剂
- 具有在防止气味和便泄漏的同时，可顺利排气的高机能除臭过滤器 (也有无过滤器的型号)



种类	商品编号	规格			数量 / 盒
		开口大小	造口有效直径	袋子尺寸 (长 × 宽)	
肉色	17441	20mm ϕ	14~59mm (随意开孔)	275mm×150mm	10个
不带过滤器	17451	20mm ϕ	14~59mm (随意开孔)	275mm×150mm	10个
20	17461	20mm ϕ	14~59mm (随意开孔)	275mm×150mm	10个
25	17462	25mm ϕ	19~24mm	275mm×150mm	10个
30	17463	30mm ϕ	24~29mm	275mm×150mm	10个
35	17464	35mm ϕ	29~34mm	275mm×150mm	10个
40	17465	40mm ϕ	34~39mm	275mm×150mm	10个
45	17466	45mm ϕ	39~44mm	275mm×150mm	10个
50	17467	50mm ϕ	44~49mm	275mm×150mm	10个

Youcare-TDs

一件式造口系统

特征

- 魔术贴型，操作简便
- 弱凸底盘，舒适防漏
- 底盘内使用了柔顺而经久耐用的薄型皮肤保护剂
- 具有在防止气味和便泄漏的同时，可顺利排气的高机能除臭过滤器 (也有无过滤器的型号)



种类	商品编号	规格			数量 / 盒
		开口大小	造口有效直径	袋子尺寸 (长 × 宽)	
30随意开孔	20171	15mm ϕ	14~29mm	275mm×150mm	10个
40随意开孔	20172	25mm ϕ	24~39mm	275mm×150mm	10个
50随意开孔	20173	35mm ϕ	34~49mm	275mm×150mm	10个

Youcare-TDc

一件式造口系统

特征

- 魔术贴型，操作简便
- 凸面底盘，防漏效果好
- 底盘内使用了柔顺而经久耐用的薄型皮肤保护剂
- 具有在防止气味和便泄漏的同时，可顺利排气的高机能除臭过滤器 (也有无过滤器的型号)



种类	商品编号	规格			数量 / 盒
		开口大小	造口有效直径	袋子尺寸 (长 × 宽)	
22	17471	22mm ϕ	18~21mm	275mm×150mm	10个
25	17472	25mm ϕ	21~24mm	275mm×150mm	10个
28	17473	28mm ϕ	24~27mm	275mm×150mm	10个
32	17474	32mm ϕ	27~31mm	275mm×150mm	10个
36	17475	36mm ϕ	31~35mm	275mm×150mm	10个
40	17476	40mm ϕ	35~39mm	275mm×150mm	10个
45	17477	45mm ϕ	39~44mm	275mm×150mm	10个
50	17478	50mm ϕ	44~49mm	275mm×150mm	10个
45随意开孔	20161	15mm ϕ	29~44mm	275mm×150mm	10个
55随意开孔	20162	25mm ϕ	39~54mm	275mm×150mm	10个

Youcare-D

一件式造口系统

特征

- 底盘内使用了柔顺而经久耐用的薄型皮肤保护剂
- 具有在防止气味和便泄漏的同时，可顺利排气的高机能除臭过滤器 (也有无过滤器的型号)



种类	商品编号	规格			数量 / 盒
		开口大小	造口有效直径	袋子尺寸 (长 × 宽)	
肉色	16761	20mm ϕ	14~59mm (随意开孔)	275mm×150mm	30个
不带过滤器	16771	20mm ϕ	14~59mm (随意开孔)	275mm×150mm	30个
20	16781	20mm ϕ	14~59mm (随意开孔)	275mm×150mm	30个
25	16782	25mm ϕ	19~24mm	275mm×150mm	30个
30	16783	30mm ϕ	24~29mm	275mm×150mm	30个
35	16784	35mm ϕ	29~34mm	275mm×150mm	30个
40	16785	40mm ϕ	34~39mm	275mm×150mm	30个
45	16786	45mm ϕ	39~44mm	275mm×150mm	30个
50	16787	50mm ϕ	44~49mm	275mm×150mm	30个

Youcare-Dc

一件式造口系统

特征

- 底盘内使用了柔顺而经久耐用的薄型皮肤保护剂
- 凸面底盘，防漏效果好
- 具有在防止气味和便泄漏的同时，可顺利排气的高机能除臭过滤器
- 如需提高底盘的贴附性，可使用 Youcare 固定腰带 (P35)



种类	商品编号	规格			数量 / 盒
		开口大小	造口有效直径	袋子尺寸 (长 × 宽)	
22	16811	22mm ϕ	18~21mm	275mm×150mm	10个
25	16812	25mm ϕ	21~24mm	275mm×150mm	10个
28	16813	28mm ϕ	24~27mm	275mm×150mm	10个
32	16814	32mm ϕ	27~31mm	275mm×150mm	10个
36	16815	36mm ϕ	31~35mm	275mm×150mm	10个
40	16816	40mm ϕ	35~39mm	275mm×150mm	10个
45	16817	45mm ϕ	39~44mm	275mm×150mm	10个
50	16818	50mm ϕ	44~49mm	275mm×150mm	10个

Youcare-C

一件式造口系统

特征

- 底盘内使用了柔顺而经久耐用的薄型皮肤保护剂
- 具有在防止气味和便泄漏的同时，可顺利排气的高机能除臭过滤器



种类	商品编号	规格			数量 / 盒
		开口大小	造口有效直径	袋子尺寸 (长 × 宽)	
肉色	16791	20mm ϕ	14~59mm (随意开孔)	200mm×150mm	30个
20	16801	20mm ϕ	14~59mm (随意开孔)	200mm×150mm	30个
25	16802	25mm ϕ	19~24mm	200mm×150mm	30个
30	16803	30mm ϕ	24~29mm	200mm×150mm	30个
35	16804	35mm ϕ	29~34mm	200mm×150mm	30个
40	16805	40mm ϕ	34~39mm	200mm×150mm	30个
45	16806	45mm ϕ	39~44mm	200mm×150mm	30个
50	16807	50mm ϕ	44~49mm	200mm×150mm	30个

Youcare-Cc

一件式造口系统

特征

- 底盘内使用了柔顺而经久耐用的薄型皮肤保护剂
- 凸面底盘，防漏效果好
- 具有在防止气味和便泄漏的同时，可顺利排气的高机能除臭过滤器
- 如需提高底盘的贴附性，可使用 Youcare 固定腰带 (P35)



种类	商品编号	规格			数量 / 盒
		开口大小	造口有效直径	袋子尺寸 (长 × 宽)	
22	16821	22mm ϕ	18~21mm	200mm×150mm	10个
25	16822	25mm ϕ	21~24mm	200mm×150mm	10个
28	16823	28mm ϕ	24~27mm	200mm×150mm	10个
32	16824	32mm ϕ	27~31mm	200mm×150mm	10个
36	16825	36mm ϕ	31~35mm	200mm×150mm	10个
40	16826	40mm ϕ	35~39mm	200mm×150mm	10个
45	16827	45mm ϕ	39~44mm	200mm×150mm	10个
50	16828	50mm ϕ	44~49mm	200mm×150mm	10个

Cellcare 肠道口护理用品

Youcare 肠道口护理用品

Procare 肠道口护理用品

其它 肠道口护理用品

Cellcare 尿路造口护理用品

Youcare 尿路造口护理用品

Procare 尿路造口护理用品

附件用品

灌注器配套用品

Cellcare 肠道口护理用品

Youcare 肠道口护理用品

Procare 肠道口护理用品

其它 肠道口护理用品

Cellcare 尿路造口护理用品

Youcare 尿路造口护理用品

Procare 尿路造口护理用品

附件用品

灌注器配套用品

Youcare 2-F

两件式造口系统

- 特征**
- 平面底盘
 - 底盘外周薄，贴切身体，无异物感



平面底盘
预载剪型
随意开孔型

种类	商品编号	规格				数量 / 盒
		开口大小	造口有效直径	袋子尺寸	对应造口袋	
M22	16591	22mm \varnothing	16~34mm (随意开孔)	97mm \times 105mm	M	5个
M25	16592	25mm \varnothing	21~24mm	97mm \times 105mm	M	5个
M28	16593	28mm \varnothing	24~27mm	97mm \times 105mm	M	5个
L32	16594	32mm \varnothing	27~31mm	108mm \times 117mm	L	5个
L36	16595	36mm \varnothing	31~35mm	108mm \times 117mm	L	5个
L40	16596	40mm \varnothing	35~39mm	108mm \times 117mm	L	5个
L45	16597	10mm \varnothing	4~44mm (随意开孔)	108mm \times 117mm	L	5个
65	16598	10mm \varnothing	4~64mm (随意开孔)	129mm \times 140mm	65	5个

Youcare 2-Df

两件式造口系统

- 特征**
- 具有在防止气味和便泄漏的同时，可顺利排气的高机能除臭过滤器
 - 如需提高底盘的贴附性，可使用 Youcare 固定腰带 (P34)



下部排放口
封口夹型等

种类	商品编号	规格		数量 / 盒
		袋子尺寸 (长 \times 宽)		
透明	M	16611	300mm \times 150mm	10个
	L	16612	300mm \times 150mm	10个
	65	16613	300mm \times 150mm	10个
肉色	M	17741	300mm \times 150mm	10个
	L	17742	300mm \times 150mm	10个

Youcare 2-Fc

两件式造口系统

- 特征**
- 凸面底盘，防漏效果好
 - 底盘周围的加固胶带可防止入浴时的皮肤保护剂周围溶解



凸面底盘
预载剪型

种类	商品编号	规格				数量 / 盒
		开口大小	造口有效直径	底盘尺寸	对应造口袋	
M22	16601	22mm \varnothing	18~21mm	110mm \varnothing	M	5个
M25	16602	25mm \varnothing	21~24mm	110mm \varnothing	M	5个
M28	16603	28mm \varnothing	24~27mm	110mm \varnothing	M	5个
L32	16604	32mm \varnothing	27~31mm	120mm \varnothing	L	5个
L36	16605	36mm \varnothing	31~35mm	120mm \varnothing	L	5个
L40	16606	40mm \varnothing	35~39mm	120mm \varnothing	L	5个

Youcare 2-D

两件式造口系统

- 特征**
- 无除臭过滤器的造口袋
 - 如需提高底盘的贴附性，可使用 Youcare 固定腰带 (P34)



下部排放口
封口夹型等

种类	商品编号	规格		数量 / 盒
		袋子尺寸 (长 \times 宽)		
透明	M	16621	300mm \times 150mm	10个
	L	16622	300mm \times 150mm	10个
	65	16623	300mm \times 150mm	10个
肉色	M	17751	300mm \times 150mm	10个
	L	17752	300mm \times 150mm	10个

Youcare 2-TDf

两件式造口系统

- 特征**
- 具有在防止气味和便泄漏的同时，可顺利排气的高机能除臭过滤器
 - 魔术贴型，操作简便
 - 如需提高底盘的贴附性，可使用 Youcare 固定腰带 (P34)



下部排放口
魔术贴型

种类	商品编号	规格		数量 / 盒
		袋子尺寸 (长 \times 宽)		
透明	M	17761	300mm \times 150mm	10个
	L	17762	300mm \times 150mm	10个
	65	17763	300mm \times 150mm	10个
肉色	M	17771	300mm \times 150mm	10个
	L	17772	300mm \times 150mm	10个

Youcare 2-Cf

两件式造口系统

- 特征**
- 具有在防止气味和便泄漏的同时，可顺利排气的高机能除臭过滤器
 - 如需提高底盘的贴附性，可使用 Youcare 固定腰带 (P34)



闭口型

种类	商品编号	规格		数量 / 盒
		袋子尺寸 (长 \times 宽)		
透明	M	16631	210mm \times 150mm	10个
	L	16632	210mm \times 150mm	10个
	65	16633	210mm \times 150mm	10个
肉色	M	17801	210mm \times 150mm	10个
	L	17802	210mm \times 150mm	10个

Youcare 2-TD

两件式造口系统

- 特征**
- 无除臭过滤器的造口袋
 - 魔术贴型，操作简便
 - 如需提高底盘的贴附性，可使用 Youcare 固定腰带 (P34)



下部排放口
魔术贴型

种类	商品编号	规格		数量 / 盒
		袋子尺寸 (长 \times 宽)		
透明	M	17781	300mm \times 150mm	10个
	L	17782	300mm \times 150mm	10个
	65	17783	300mm \times 150mm	10个
肉色	M	17791	300mm \times 150mm	10个
	L	17792	300mm \times 150mm	10个

Cellcare
肠道造口护理用品

Youcare
肠道造口护理用品

Prococare
肠道造口护理用品

其它
肠道造口护理用品

Cellcare
尿路造口护理用品

Youcare
尿路造口护理用品

Prococare
尿路造口护理用品

附件用品

灌洗器配套用品

Cellcare
肠道造口护理用品

Youcare
肠道造口护理用品

Prococare
肠道造口护理用品

其它
肠道造口护理用品

Cellcare
尿路造口护理用品

Youcare
尿路造口护理用品

Prococare
尿路造口护理用品

附件用品

灌洗器配套用品

Procare 1-Free Cut D

一件式造口系统

- 特征**
- 从无纺布上的观察小窗可以确认造口位置及性状
 - 底盘周围的加固胶带可防止外部液体对皮肤保护剂周边的溶解



平面底盘 下部排放口封口夹型等 随意开孔型

种类	商品编号	规格			数量 / 盒
		开口大小	造口有效直径	袋子尺寸 (长 × 宽)	
50	12331	20mmø	14~49mm (随意开孔)	300mm×150mm	10个

Procare 1-Pre Cut D

一件式造口系统

- 特征**
- 底盘周围的胶带可防止外部液体对皮肤保护剂周边的溶解
 - 预裁剪型, 无需裁剪开口, 使用方便



平面底盘 下部排放口封口夹型等 预裁剪型

种类	商品编号	规格			数量 / 盒
		开口大小	造口有效直径	袋子尺寸 (长 × 宽)	
20	14181	20mmø	14~19mm	300mm×150mm	10个
25	14182	25mmø	19~24mm	300mm×150mm	10个
30	14183	30mmø	24~29mm	300mm×150mm	10个
35	14184	35mmø	29~34mm	300mm×150mm	10个
40	14185	40mmø	34~39mm	300mm×150mm	10个

Procare 1-Pre Cut Dc

一件式造口系统

- 特征**
- 底盘周围的胶带可防止外部液体对皮肤保护剂周边的溶解
 - 预裁剪型, 无需裁剪开口, 使用方便
 - 如需提高底盘的贴附性, 可使用固定腰带 (P35)



凸面底盘 下部排放口封口夹型等 预裁剪型

种类	商品编号	规格			数量 / 盒
		开口大小	造口有效直径	袋子尺寸 (长 × 宽)	
22	12366	22mmø	18~21mm	300mm×150mm	5个
25	12361	25mmø	21~24mm	300mm×150mm	5个
28	12362	28mmø	24~27mm	300mm×150mm	5个
32	12363	32mmø	27~31mm	300mm×150mm	5个
36	12364	36mmø	31~35mm	300mm×150mm	5个
40	12365	40mmø	35~39mm	300mm×150mm	5个

Procare 1-Free Cut C

一件式造口系统

- 特征**
- 从无纺布上的观察小窗可以确认造口位置及性状
 - 底盘周围的胶带可防止外部液体对皮肤保护剂周边的溶解



平面底盘 闭口型 随意开孔型

种类	商品编号	规格			数量 / 盒
		开口大小	造口有效直径	袋子尺寸 (长 × 宽)	
50	12341	20mmø	14~49mm (随意开孔)	210mm×150mm	10个

Procare 1-Pre Cut C

一件式造口系统

- 特征**
- 底盘周围的胶带可防止外部液体对皮肤保护剂周边的溶解
 - 预裁剪型, 无需裁剪开口, 使用方便



平面底盘 闭口型 预裁剪型

种类	商品编号	规格			数量 / 盒
		开口大小	造口有效直径	袋子尺寸 (长 × 宽)	
20	14191	20mmø	14~19mm	210mm×150mm	10个
25	14192	25mmø	19~24mm	210mm×150mm	10个
30	14193	30mmø	24~29mm	210mm×150mm	10个
35	14194	35mmø	29~34mm	210mm×150mm	10个
40	14195	40mmø	34~39mm	210mm×150mm	10个
45	14196	45mmø	39~44mm	210mm×150mm	10个
50	14197	50mmø	44~49mm	210mm×150mm	10个

Pediatric Procare 1-Post OP

一件式造口系统

- 特征**
- 儿童专用肠造口袋
 - 造口袋采用宽型排放口, 容易对造口周围进行护理



平面底盘 下部排放口封口夹型等 随意开孔型

种类	商品编号	规格			数量 / 盒
		开口大小	造口有效直径	袋子尺寸 (长 × 宽)	
—	14211	无	34mm (随意开孔)	230mm×110mm	10个

Pediatric Procare 1-D

一件式造口系统

- 特征**
- 椭圆形底盘不妨碍身体活动, 且可确保充足的粘贴面积
 - 如需提高底盘的贴附性, 可使用小儿固定腰带 (P35)



平面底盘 下部排放口封口夹型等 随意开孔型

种类	商品编号	规格			数量 / 盒
		开口大小	造口有效直径	袋子尺寸 (长 × 宽)	
—	14221	无	24mm×34mm (椭圆)	230mm×130mm	10个

Procare 2-F

两件式造口系统

- 特征**
- 底盘整体使用皮肤保护剂, 不易引起过敏
 - 可以护理的最大造口直径为 69mm



平面底盘 随意开孔型


种类	商品编号	规格				数量 / 盒
		开口大小	造口有效直径	底盘尺寸	对应造口袋	
30	12091	10mmø	4~29mm (随意开孔)	100mm×100mm	30	5个
40	12092	10mmø	29~39mm (随意开孔)	100mm×100mm	40	5个
50	12093	10mmø	39~49mm (随意开孔)	110mm×110mm	50	5个
70	12094	10mmø	49~69mm (随意开孔)	130mm×130mm	70	5个

Procare 2-Fa

两件式造口系统

特征

- 底盘周围的胶带可防止外部液体对皮肤保护剂周边的溶解

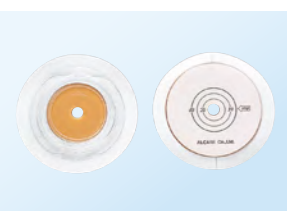

平面
底盘

随意开孔型

种类	商品编号	规格				数量 / 盒
		开口大小	造口有效直径	底盘尺寸	对应造口袋	
30	12101	10mmø	4~29mm (随意开孔)	100mmø	30	5个
40	12102	10mmø	29~39mm (随意开孔)	110mmø	40	5个
50	12103	10mmø	39~49mm (随意开孔)	120mmø	50	5个

Procare 2-Fc

两件式造口系统

特征

- 凸面底盘，防漏效果好
- 底盘周围的胶带可防止外部液体对皮肤保护剂周边的溶解
- 如需提高底盘的贴附性，可使用固定腰带 (P34)



凸面
底盘

预载剪型

种类	商品编号	规格				数量 / 盒
		开口大小	造口有效直径	底盘尺寸	对应造口袋	
22-40	12126	22mmø	18~21mm	110mmø	40	5个
25-40	12121	25mmø	21~24mm	110mmø	40	5个
28-50	12122	28mmø	24~27mm	120mmø	50	5个
32-50	12123	32mmø	27~31mm	120mmø	50	5个
36-50	12124	36mmø	31~35mm	120mmø	50	5个
40-50	12125	40mmø	35~39mm	120mmø	50	5个

Procare 2-D

两件式造口系统

特征

- 有方便观察造口及排泄物性状的透明型造口袋，及保护隐私的肉色型造口袋



下部
排放口
封口
夹型
等

种类	商品编号	规格		数量 / 盒
		袋子尺寸 (长 × 宽)		
透明	30	12131	300mm × 150mm	10个
	40	12132	300mm × 150mm	10个
	50	12133	300mm × 150mm	10个
	70	12134	310mm × 165mm	10个
肉色	30	13641	300mm × 150mm	10个
	40	13642	300mm × 150mm	10个
	50	13643	300mm × 150mm	10个

Procare 2-C

两件式造口系统

特征

- 有方便观察造口及排泄物性状的透明型造口袋，及保护隐私的肉色型造口袋



闭口型

种类	商品编号	规格		数量 / 盒
		袋子尺寸 (长 × 宽)		
透明	30	12141	210mm × 150mm	10个
	40	12142	210mm × 150mm	10个
	50	12143	210mm × 150mm	10个
肉色	30	13651	210mm × 150mm	10个
	40	13652	210mm × 150mm	10个
	50	13653	210mm × 150mm	10个

Ilefine

回肠造口袋

特征

- 使用高缓冲能皮肤保护剂，可在很短时间内将强碱性的排泄物中和至弱酸性
- 使用了可防止稀便泄漏的微凸底盘
- ※D-70, D Cap Flat 是平底盘



平面
底盘

水状便
排出口

随意开孔型

微凸
底盘

下部
排放口
封口
夹型
等

下部
排放口
魔术
贴型

种类	商品编号	规格			数量 / 盒
		开口大小	造口有效直径	袋子尺寸 (长 × 宽)	
D Cap 30	16991	15mmø	14~29mm (随意开孔)	346mm × 148mm	10个
D Cap 40	16992	25mmø	24~39mm (随意开孔)	346mm × 148mm	10个
D Cap 50	16993	35mmø	34~49mm (随意开孔)	346mm × 148mm	10个
D Cap Flat 40	18171	15mmø	14~39mm (随意开孔)	346mm × 148mm	10个
D Cap Flat 50	18172	15mmø	14~49mm (随意开孔)	346mm × 148mm	10个
D Cap Flat 60	18173	15mmø	14~59mm (随意开孔)	346mm × 148mm	10个
TD-30	19581	15mmø	14~29mm (随意开孔)	300mm × 148mm	10个
TD-40	19582	25mmø	24~39mm (随意开孔)	300mm × 148mm	10个
TD-50	19583	35mmø	34~49mm (随意开孔)	300mm × 148mm	10个
TD Flat 40	20201	15mmø	14~39mm (随意开孔)	300mm × 148mm	10个
TD Flat 50	20202	15mmø	14~49mm (随意开孔)	300mm × 148mm	10个
TD Flat 60	20203	15mmø	14~59mm (随意开孔)	300mm × 148mm	10个
D-30	16981	15mmø	14~29mm (随意开孔)	300mm × 148mm	10个
D-40	16982	25mmø	24~39mm (随意开孔)	300mm × 148mm	10个
D-50	16983	35mmø	34~49mm (随意开孔)	300mm × 148mm	10个
D-70	16984	20mmø	14~69mm (随意开孔)	300mm × 148mm	5个

Pospack-K

结肠 / 回肠造口用下方开放型袋子

特征

- 造口袋采用宽型排放口，容易对造口周围进行护理



平面底盘 下部排放口封口夹型等 随意开孔型

种类	商品编号	规格			数量 / 盒
		开口大小	造口有效直径	袋子尺寸 (长 × 宽)	
70	15011	20mmø	14~69mm (随意开孔)	400mm×150mm	10个
110	15012	无	109mm (随意开孔)	400mm×170mm	10个

Pospack-B

结肠 / 回肠造口用下方开放型袋子

特征

- 造口袋采用宽型排放口，容量大



平面底盘 下部排放口封口夹型等 随意开孔型

种类	商品编号	规格			数量 / 盒
		开口大小	造口有效直径	袋子尺寸 (长 × 宽)	
—	15021	20mmø	14~59mm (随意开孔)	400mm×150mm	10个

Pospack-Simple

结肠 / 回肠造口用下方开放型袋子

特征

- 使用柔软的超薄型皮肤保护剂
- 造口袋采用宽型排放口，容量大
- 性价比好



平面底盘 下部排放口封口夹型等 随意开孔型

种类	商品编号	规格			数量 / 盒
		开口大小	造口有效直径	袋子尺寸 (长 × 宽)	
—	15041	20mmø	14~49mm (随意开孔)	400mm×110mm	30个

Lapack-Super G

结肠 / 回肠造口用下方开放型袋子

特征

- 因为是下方开口型，大排放口易处理排泄物
- 大容量
- 性价比好



平面底盘 下部排放口封口夹型等 随意开孔型

种类	商品编号	规格			数量 / 盒
		开口大小	造口有效直径	袋子尺寸 (长 × 宽)	
80	12501	无	39mm (随意开孔)	300mm×90mm	30个
100	12502	无	49mm (随意开孔)	400mm×110mm	30个
125	12503	无	74mm (随意开孔)	400mm×135mm	30个

Lapack-Super C

结肠用闭合型袋子

特征

- 外形简洁，轻便
- 造口袋透明，容易粘贴及观察便的性状
- 性价比好



平面底盘 闭口型 随意开孔型


种类	商品编号	规格			数量 / 盒
		开口大小	造口有效直径	袋子尺寸 (长 × 宽)	
100	12511	30mmø	24~49mm (随意开孔)	200mm×140mm	30个
125	12512	30mmø	24~74mm (随意开孔)	250mm×150mm	30个

Lapack-Super F

结肠用闭合型袋子

特征

- 上部采用拉链关闭，容易排出气体
- 外形简洁，轻便
- 性价比好

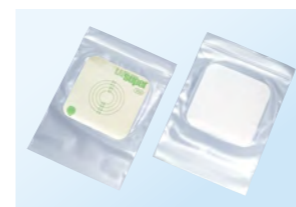

平面底盘 上部开放型 随意开孔型

种类	商品编号	规格			数量 / 盒
		开口大小	造口有效直径	袋子尺寸 (长 × 宽)	
100	12521	无	49mm (随意开孔)	200mm×140mm	30个
125	12522	无	74mm (随意开孔)	260mm×160mm	30个

尿路造口护理用品

一件式/两件式

图示说明

底盘 (腹部贴附部分)
反映底盘的特征

平面底盘 整体为平面适用于有高度的造口

凸面底盘 底盘内侧凸出, 适用于没有高度的造口

造口袋 (蓄积排泄物)
反映造口袋的形状和特征

双重开关排放口 尿路排出口为双重开关的造口袋


单开关排放口 尿排出口下部排放口为单开关的造口袋

随意开孔型 按照造口的大小, 可剪裁开口的底盘类型

预载剪型 产品制造时设置的开口, 省去了开孔的时间

造口袋选择指南

可简单地选择合适的品牌

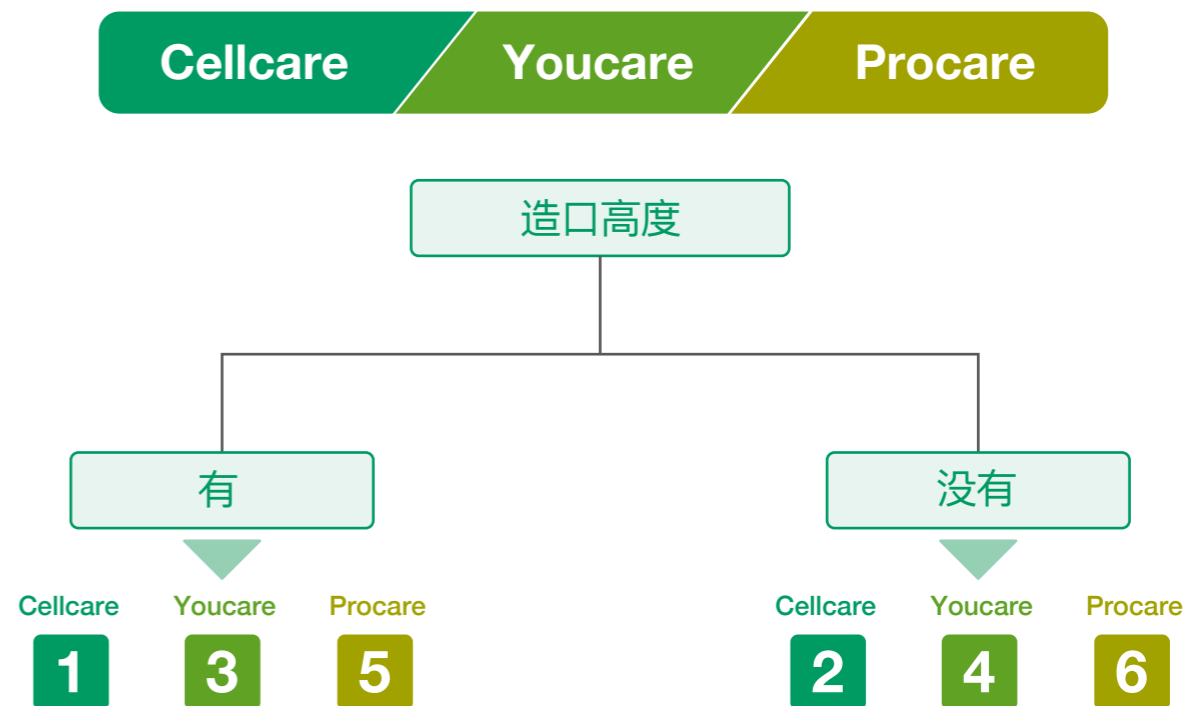

造口袋系列选择指南 (Cellcare)

1	◇造口高度 : 有 ◇排泄物性状 : 尿
Cellcare 1-U	平面底盘, 双重开关排放口, 预载剪型, 随意开孔型
Cellcare 2-F+U	平面底盘, 双重开关排放口, 预载剪型, 随意开孔型
2	◇造口高度 : 没有 ◇排泄物性状 : 尿
Cellcare 1-Uc	凸面底盘, 双重开关排放口, 预载剪型
Cellcare 2-Fc+U	凸面底盘, 双重开关排放口, 预载剪型

造口袋选择指南

造口袋系列选择指南 (Youcare)

3 ◇造口高度 : 有
◇排泄物性状 : 尿

Youcare-U

平面底盘 双重开关排放口 预载剪型 随意开孔型

Youcare 2-Fu+U

平面底盘 双重开关排放口 预载剪型 随意开孔型

4 ◇造口高度 : 没有
◇排泄物性状 : 尿

Youcare-Uc

凸面底盘 双重开关排放口 预载剪型

Youcare 2-Fuc+U

凸面底盘 双重开关排放口 预载剪型

造口袋系列选择指南 (Procare)

5 ◇造口高度 : 有
◇排泄物性状 : 尿

Procare-U

平面底盘 单开关排放口 预载剪型 随意开孔型

Procare 2-Fa Uro+U

平面底盘 单开关排放口 预载剪型 随意开孔型

6 ◇造口高度 : 没有
◇排泄物性状 : 尿

Procare-Uc

凸面底盘 单开关排放口 预载剪型

Procare 2-Fc Uro+U

凸面底盘 单开关排放口 预载剪型

Cellcare 【保持皮肤健康的精华款】 尿路造口用

Cellcare 1-U

一件式造口系统

- 特征
- 一件式, 无异物感
 - 双重开关, 方便连接引流袋或集尿袋



种类	商品编号	规格			数量 / 盒
		开口大小	造口有效直径	袋子尺寸 (长 × 宽)	
10 随意开孔	18721	10mmø	4~49mm (随意开孔)	260mm×150mm	10个
20	18722	20mmø	14~19mm	260mm×150mm	10个
25	18723	25mmø	19~24mm	260mm×150mm	10个
30	18724	30mmø	24~29mm	260mm×150mm	10个
35	18725	35mmø	29~34mm	260mm×150mm	10个
40	18726	40mmø	34~39mm	260mm×150mm	10个

Cellcare 1-Uc

一件式造口系统

- 特征
- 凸面底盘, 防漏效果好
 - 双重开关, 方便连接引流袋或集尿袋




种类	商品编号	规格			数量 / 盒
		开口大小	造口有效直径	袋子尺寸 (长 × 宽)	
13	18731	13mmø	9~12mm	260mm×150mm	5个
16	18732	16mmø	12~15mm	260mm×150mm	5个
19	18733	19mmø	15~18mm	260mm×150mm	5个
22	18734	22mmø	18~21mm	260mm×150mm	5个
25	18735	25mmø	21~24mm	260mm×150mm	5个
28	18736	28mmø	24~27mm	260mm×150mm	5个
32	18737	32mmø	27~31mm	260mm×150mm	5个

Cellcare 2-F

两件式造口系统

- 特征
- 底盘柔软, 贴附性好
 - 如需提高底盘的贴附性, 可使用固定腰带 II (P35)

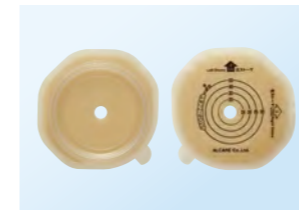

种类	商品编号	规格				数量 / 盒
		开口大小	造口有效直径	底盘尺寸	对应造口袋	
M 随意开孔	18251	10mmø	4~39mm (随意开孔)	88mm×88mm	M	5个
M16	18661	16mmø	12~15mm	88mm×88mm	M	5个
M19	18662	19mmø	15~18mm	88mm×88mm	M	5个
M22	18252	22mmø	18~21mm	88mm×88mm	M	5个
M25	18253	25mmø	21~24mm	88mm×88mm	M	5个
M28	18254	28mmø	24~27mm	88mm×88mm	M	5个
L 随意开孔	18255	10mmø	4~49mm (随意开孔)	98mm×98mm	L	5个
L32	18256	32mmø	27~31mm	98mm×98mm	L	5个
L36	18257	36mmø	31~35mm	98mm×98mm	L	5个
L40	18258	40mmø	35~39mm	98mm×98mm	L	5个

Cellcare 肠造口护理用品

Youcare 肠造口护理用品

Procare 肠造口护理用品

其它 肠造口护理用品

Cellcare 尿路造口护理用品

Youcare 尿路造口护理用品

Procare 尿路造口护理用品


附件用品

灌洗器配套用品

Cellcare 2-Fc

两件式造口系统

- 特征**
- 凸型底盘，防漏效果好
 - 如需提高底盘的贴附性，可使用固定腰带 II (P35)

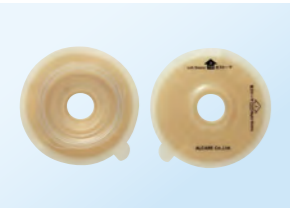

凸面底盘 预载剪型

种类	商品编号	规格				数量 / 盒
		开口大小	造口有效直径	底盘尺寸	对应造口袋	
M13	18387	13mm ϕ	9~12mm	100mm ϕ	M	5个
M16	18388	16mm ϕ	12~15mm	100mm ϕ	M	5个
M19	18389	19mm ϕ	15~18mm	100mm ϕ	M	5个
M22	18381	22mm ϕ	18~21mm	100mm ϕ	M	5个
M25	18382	25mm ϕ	21~24mm	100mm ϕ	M	5个
M28	18383	28mm ϕ	24~27mm	100mm ϕ	M	5个
L32	18384	32mm ϕ	27~31mm	110mm ϕ	L	5个
L36	18385	36mm ϕ	31~35mm	110mm ϕ	L	5个
L40	18386	40mm ϕ	35~39mm	110mm ϕ	L	5个

Youcare-U

一件式造口系统

- 特征**
- 采用尿路专用薄型皮肤保护剂



平面底盘 双重开关排放口 预载剪型 随意开孔型

种类	商品编号	规格			数量 / 盒
		开口大小	造口有效直径	袋子尺寸 (长 × 宽)	
10	15361	10mm ϕ	4~59mm (随意开孔)	260mm×150mm	10个
20	15362	20mm ϕ	14~19mm	260mm×150mm	10个
25	15363	25mm ϕ	19~24mm	260mm×150mm	10个
30	15364	30mm ϕ	24~29mm	260mm×150mm	10个
35	15365	35mm ϕ	29~34mm	260mm×150mm	10个
40	15366	40mm ϕ	34~39mm	260mm×150mm	10个

Youcare-Uc

一件式造口系统

- 特征**
- 采用尿路专用薄型皮肤保护剂
 - 凸型底盘，防漏效果好
 - 如需提高底盘的贴附性，可使用 Youcare 固定腰带 (P35)



凸面底盘 双重开关排放口 预载剪型

种类	商品编号	规格			数量 / 盒
		开口大小	造口有效直径	袋子尺寸 (长 × 宽)	
13	16401	13mm ϕ	9~12mm	260mm×150mm	10个
16	16402	16mm ϕ	12~15mm	260mm×150mm	10个
19	16403	19mm ϕ	15~18mm	260mm×150mm	10个
22	16404	22mm ϕ	18~21mm	260mm×150mm	10个
25	16405	25mm ϕ	21~24mm	260mm×150mm	10个
28	16406	28mm ϕ	24~27mm	260mm×150mm	10个
32	16407	32mm ϕ	27~31mm	260mm×150mm	10个

Cellcare 2-U

两件式造口系统

- 特征**
- 双重开关，方便连接引流袋或集尿袋



双重开关排放口

种类	商品编号	规格		数量 / 盒
		袋子尺寸 (长 × 宽)		
M	18681	260mm×150mm		10个
L	18682	260mm×150mm		10个

Youcare 2-Fu

两件式造口系统

- 特征**
- 底盘外周薄，贴附性好，无异物感



平面底盘 预载剪型 随意开孔型

种类	商品编号	规格				数量 / 盒
		开口大小	造口有效直径	底盘尺寸	对应造口袋	
M13	16641	13mm ϕ	7~34mm (随意开孔)	97mm×105mm	M	5个
M16	16642	16mm ϕ	12~15mm	97mm×105mm	M	5个
M19	16643	19mm ϕ	15~18mm	97mm×105mm	M	5个
M22	16644	22mm ϕ	18~21mm	97mm×105mm	M	5个
M25	16645	25mm ϕ	21~24mm	97mm×105mm	M	5个
M28	16646	28mm ϕ	24~27mm	97mm×105mm	M	5个
L32	16647	32mm ϕ	27~44mm (随意开孔)	108mm×117mm	L	5个

Youcare 2-Fuc

两件式造口系统

- 特征**
- 凸型底盘，防漏效果好
 - 底盘周围的胶带可防止外部液体对皮肤保护剂周边的溶解



凸面底盘 预载剪型

种类	商品编号	规格				数量 / 盒
		开口大小	造口有效直径	底盘尺寸	对应造口袋	
M13	16651	13mm ϕ	9~12mm	110mm ϕ	M	5个
M16	16652	16mm ϕ	12~15mm	110mm ϕ	M	5个
M19	16653	19mm ϕ	15~18mm	110mm ϕ	M	5个
M22	16654	22mm ϕ	18~21mm	110mm ϕ	M	5个
M25	16655	25mm ϕ	21~24mm	110mm ϕ	M	5个
M28	16656	28mm ϕ	24~27mm	110mm ϕ	M	5个
L32	16657	32mm ϕ	27~31mm	120mm ϕ	L	5个

Cellcare 肠造口护理用品

Youcare 肠造口护理用品

Procare 肠造口护理用品

其它 肠造口护理用品

Cellcare 尿路造口护理用品

Youcare 尿路造口护理用品

Procare 尿路造口护理用品

附件用品

灌洗器配套用品

Cellcare 肠造口护理用品

Youcare 肠造口护理用品

Procare 肠造口护理用品

其它 肠造口护理用品

Cellcare 尿路造口护理用品

Youcare 尿路造口护理用品

Procare 尿路造口护理用品

附件用品

灌洗器配套用品

Youcare 2-U

两件式造口系统

特征

- 如需提高底盘的贴附性，可使用 Youcare 固定腰带 (P34)



种类	商品编号	规格		数量 / 盒
		袋子尺寸 (长 × 宽)		
M	16661	260mm × 150mm		10个
L	16662	260mm × 150mm		10个

双重
开关
排放口

Procare 1-Free Cut U

一件式造口系统

特征

- 从无纺布上的观察小窗可以确认造口位置及性状
- 底盘周围的胶带可防止外部液体对皮肤保护剂周边的溶解



种类	商品编号	规格			数量 / 盒
		开口大小	造口有效直径	袋子尺寸 (长 × 宽)	
50	12351	10mmø	4~49mm (随意开孔)	260mm × 150mm	10个

平面
底盘

单开关
排放口

随意开孔型

Procare 1-Pre Cut U

一件式造口系统

特征

- 底盘周围的胶带可防止外部液体对皮肤保护剂周边的溶解
- 预载剪型，无需裁剪开口，使用方便



种类	商品编号	规格			数量 / 盒
		开口大小	造口有效直径	袋子尺寸 (长 × 宽)	
15	14201	15mmø	9~14mm	260mm × 150mm	10个
20	14202	20mmø	14~19mm	260mm × 150mm	10个
25	14203	25mmø	19~24mm	260mm × 150mm	10个
30	14204	30mmø	24~29mm	260mm × 150mm	10个
35	14205	35mmø	29~34mm	260mm × 150mm	10个

平面
底盘

单开关
排放口

预载剪型

Procare 1-Pre Cut Uc

一件式造口系统

特征

- 底盘周围的胶带可防止外部液体对皮肤保护剂周边的溶解
- 凸面底盘，防漏效果好
- 如需提高底盘的贴附性，可使用固定腰带 (P34)



种类	商品编号	规格			数量 / 盒
		开口大小	造口有效直径	袋子尺寸 (长 × 宽)	
16	12371	16mmø	12~15mm	260mm × 150mm	5个
19	12372	19mmø	15~18mm	260mm × 150mm	5个
22	12373	22mmø	18~21mm	260mm × 150mm	5个
25	12374	25mmø	21~24mm	260mm × 150mm	5个
28	12375	28mmø	24~27mm	260mm × 150mm	5个

凸面
底盘

单开关
排放口

预载剪型

Pediatric Procare 1-U

一件式造口系统

特征

- 椭圆形的底盘，不影响身体活动，确保充分的粘贴面积
- 如需提高底盘的贴附性，可使用小儿固定腰带 (P35)



种类	商品编号	规格			数量 / 盒
		开口大小	造口有效直径	袋子尺寸 (长 × 宽)	
—	14231	无	24mm × 34mm (椭圆)	205mm × 130mm	10个

平面
底盘

单开关
排放口


随意开孔型

Procare 2-Fa Uro

两件式造口系统

特征

- 底盘周围的胶带可防止外部液体对皮肤保护剂周边的溶解

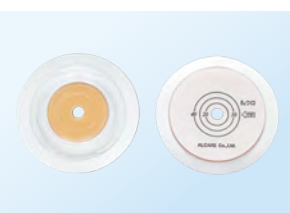

平面
底盘

随意开孔型

种类	商品编号	规格				数量 / 盒
		开口大小	造口有效直径	底盘尺寸	对应造口袋	
30	13381	10mm ϕ	4~29mm (随意开孔)	100mm ϕ	30	5个
40	13382	10mm ϕ	29~39mm (随意开孔)	110mm ϕ	40	5个
50	13383	10mm ϕ	39~49mm (随意开孔)	120mm ϕ	50	5个

Procure 2-Fc Uro

两件式造口系统

特征

- 底盘周围的胶带可防止外部液体对皮肤保护剂周边的溶解
- 如需提高底盘的贴附性, 可使用固定腰带 (P34)



凸面
底盘

预载剪型

种类	商品编号	规格				数量 / 盒
		开口大小	造口有效直径	底盘尺寸	对应造口袋	
16-40	13391	16mm ϕ	12~15mm	110mm ϕ	40	5个
19-40	13392	19mm ϕ	15~18mm	110mm ϕ	40	5个
22-40	13393	22mm ϕ	18~21mm	110mm ϕ	40	5个
25-40	13394	25mm ϕ	21~24mm	110mm ϕ	40	5个
28-50	13395	28mm ϕ	24~27mm	120mm ϕ	50	5个

Procure 2-U

两件式造口系统

特征

- 具有方便观察造口及尿液性状的透明型造口袋, 保护隐私的肉色型造口袋两种



单开关
排放口

种类	商品编号	规格		数量 / 盒
		袋子尺寸 (长 × 宽)		
透明	30	12151	260mm × 150mm	10个
	40	12152	260mm × 150mm	10个
	50	12153	260mm × 150mm	10个
肉色	30	13661	260mm × 150mm	10个
	40	13662	260mm × 150mm	10个
	50	13663	260mm × 150mm	10个

Procure Remover

取下造口底盘的剥离剂

特征

- 取下造口袋底盘时减少剥离刺激
- 可用于短期剥离
- 铝制袋包装, 方便保存



种类	商品编号	规格 (液体量)	数量 / 盒
—	13871	2mL	50张

Procure Powder

梧桐胶及柑橘果胶类粉末状保护剂

特征

- 可覆盖造口和底盘之间的间隙, 保护皮肤不受排泄物伤害
- 容易散布到小的间隙, 防水性优良



种类	商品编号	规格 (内容量)	数量 / 盒
—	12611	50g	1瓶

Procure MF Pate

梧桐胶及柑橘果胶类膏状保护剂

特征

- 可覆盖造口和底盘之间的间隙, 保护皮肤不受排泄物伤害
- 由于不含有酒精, 因此不会固化, 也不会刺激皮肤



种类	商品编号	规格 (内容量)	数量 / 盒
—	12601	100g	1支

Procure Paste

梧桐胶及柑橘果胶类膏状保护剂

特征

- 可覆盖造口和底盘之间的间隙, 保护皮肤不受排泄物伤害
- 含酒精, 吸水性极强
- 铝箔管包装, 不易固化



种类	商品编号	规格 (内容量)	数量 / 盒
—	14431	50g	1支

Cellcare-Soft Wafer

含神经酰胺并可用手成形的皮肤保护剂

特征

- 适宜填补造口周围的皱褶和凹陷
- 因非常柔软，可随意地根据需求用手成形
- 含有皮肤护理成分（神经酰胺）的皮肤保护剂




种类	商品编号	规格	数量 / 盒
圈 20	20351	20mm ϕ (口径) \times 50mm ϕ (外径) \times 2.5mm (厚度)	10 个
圈 30	20352	30mm ϕ (口径) \times 60mm ϕ (外径) \times 2.5mm (厚度)	10 个
条	19781	10mm (宽) \times 100mm (长) \times 2.5mm (厚度)	10 条

Procare Soft Wafer-Ring

梧桐胶及柑橘果胶类环状皮肤保护剂

特征

- 适宜填补造口周围的皱褶和凹陷
- 适度的柔软性，无需用剪刀，可随意地根据需求用手成形
- 环形，适宜造口周边使用
- 两面粘贴型，与各种造口袋底盘有良好的亲和性

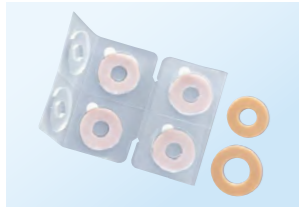

种类	商品编号	规格 (孔径)	数量 / 盒	
圈	20	15591	20mm ϕ	8 个
	30	15592	30mm ϕ	8 个

Procare Soft Wafer-Stick

梧桐胶及柑橘果胶类条状皮肤保护剂

特征

- 适宜填补造口周围的皱褶和凹陷
- 条形，适度的柔软性，无需用剪刀，可随意地根据需求用手成形
- 两面粘贴型，与各种造口袋底盘有良好的亲和性



种类	商品编号	规格 (孔径)	数量 / 盒
条	15601	15mm \times 100mm	10 条

Cellcare-Wafer

CMC, 柑橘果胶类块状皮肤保护剂

特征

- 含有皮肤护理成分（神经酰胺）的片状皮肤保护剂
- 较为柔软，可用剪刀根据需求裁剪
- 皮肤粘附性好，用于填补造口周围的皱褶和凹陷
- 两面粘贴型



种类	商品编号	规格 (长 \times 宽)	数量 / 盒
10号	18391	100mm \times 100mm	5 张

Procare Wafer

梧桐胶及柑橘果胶类块状皮肤保护剂

特征

- 适宜填补造口周围的皱褶和凹陷
- 可用剪刀根据需求裁剪
- 两面粘贴型



种类	商品编号	规格 (长 \times 宽)	数量 / 盒
10号	12581	100mm \times 100mm	10 张
20号	12582	200mm \times 195mm	5 张

Trunk Belt

造口用固定腰带

特征

- 提高底盘的贴附性，可防止底盘错位和脱落



种类	商品编号	规格		数量 / 盒
		腰围 (对应标准)	主要对应商品	
1号	12691	60~110cm	Procare 2-Fc Procare 2-Fc Uro Procare 1-Dc Procare 1-Uc Biomax Drainable Pouch Biomax Closed Pouch Biomax Urinary Pouch	1 条

Youcare Trunk Belt

造口用固定腰带

特征

- 提高底盘的贴附性，可防止底盘错位和脱落



种类	商品编号	规格		数量 / 盒
		腰围 (对应标准)	主要对应商品	
—	15091	60~110cm	Cellcare 1-TDs Cellcare 1-TDc Cellcare 1-Ds Cap Cellcare 1-Dc Cap Cellcare 1-Uc Youcare 2-TDf Youcare 2-TD Youcare 2-Df Youcare 2-D Youcare 2-Cf Youcare 2-U Youcare 2-IS Youcare 2-M Youcare 2-BC Youcare-TDs Youcare-TDc Youcare-Dc Youcare-Cc Youcare-Uc Ilefine-D Cap Ilefine-TD Ilefine-D (除了 70)	1 条

Trunk Belt with Face Plate

造口用固定腰带

特征

- 提高底盘的贴附性，可防止底盘错位和脱落



种类	商品编号	规格		数量 / 盒
		腰围 (对应标准)	主要对应商品	
—	12671	60~110cm (孔径 63mm ϕ)	Cellcare 1-TD (除了 70) Cellcare 1-D Cap (除了 70) Cellcare 1-C Cellcare 1-U Procare 1-D Procare 1-C Procare 1-U Bioclose Biourine Super Biourine	1 套

Youcare Trunk Belt with Face Plate

造口用固定腰带

特征

- 提高底盘的贴附性，可防止底盘错位和脱落




种类	商品编号	规格		数量 / 盒
		腰围 (对应标准)	主要对应商品	
—	15081	60~110cm (孔径73mmø)	Youcare-TD Youcare-D Youcare-C Youcare-U llefine-D Cap Flat (除了60) Pospack-B Pospack-Light llefine-TD Flat (除了60)	1 套

Trunk Belt with Face Plate-II

造口用固定腰带

特征

- 柔软的伸缩性固定带，整体覆盖底盘，压力均匀

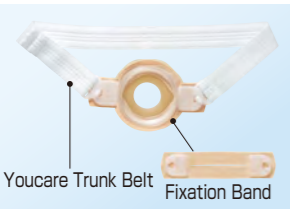

(注: 固定腰带 II 不含底盘)

种类	商品编号	规格		数量 / 盒
		腰围 (对应标准)	主要对应商品	
—	18061	Youcare Trunk Belt : 1 条 Fixation Band : 2 条	Cellcare 2-F (除了LL) Cellcare 2-Fc Procare 2-F (除了70) Procare 2-Fa Procare 2-Fa Uro	1 套

[Optional parts]

种类	商品编号	规格	数量 / 盒
Fixation Band	18071	—	2 条

Pediatric Trunk Belt

造口用固定腰带

特征

- 小儿用 Procare 1 专用腰带
- 提高底盘的贴附性，可防止底盘错位和脱落
- 将两端的纽扣嵌在袋子挂钩上，便可简单完成装卸




种类	商品编号	规格		数量 / 盒
		腰围 (对应标准)	主要对应商品	
—	14441	30~50cm	小儿用 Procare 1-D 小儿用 Procare 1-U	1 条

Gasclean

除臭排气过滤器

特征

- 排气除臭
- 可简便贴于造口袋表面使用

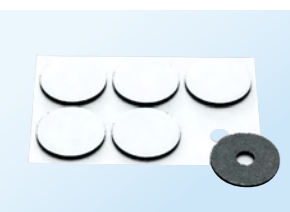


种类	商品编号	规格		数量 / 盒
		外径	厚度	
—	12681	30mmø	3mm	120 个

Cellcare 2-BC

系列专用浴盖

特征

- 由于采用紧凑的圆顶型，最适合入浴和游泳时使用
- 塑料材质，容易擦掉水分，有良好的耐久性
- 肉色能有效隐匿造口
- 配合 Cellcare 2 的底盘使用

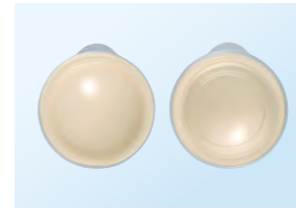


种类	商品编号	规格 (圆顶高度)	数量 / 盒
M	18291	20mm	2 个
L	18292	20mm	2 个

Youcare 2-BC

系列专用浴盖

特征

- 由于采用紧凑的圆顶型，最适合入浴和游泳时使用
- 由于是塑料制成，容易擦掉水分，有良好的耐久性
- 肉色能有效隐匿造口
- 配合 Youcare 2 的底盘使用

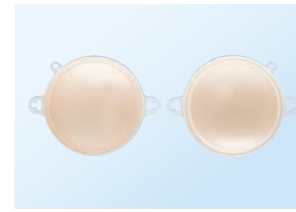

种类	商品编号	规格 (圆顶高度)	数量 / 盒
M	16681	20mm	2 个
L	16682	20mm	2 个
65	16683	20mm	2 个

Procare 2-BC

系列专用浴盖

特征

- 由于采用紧凑的圆顶型，最适合入浴和游泳时使用
- 由于是塑料制成，容易擦掉水分，有良好的耐久性
- 肉色能有效隐匿造口
- 配合 Procare 2 的底盘使用




种类	商品编号	规格 (圆顶高度)	数量 / 盒
30	12181	20mm	5 个
40	12182	20mm	5 个
50	12183	20mm	5 个

Mini Close

入浴用袋子

特征

- 适合在灌肠后和入浴时等场景使用
- 底盘上使用了皮肤刺激较小的粘合剂
- 采用小型椭圆形形状，不会妨碍身体活动，无不适感
- 肉色能有效隐匿造口

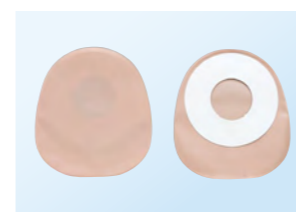


种类	商品编号	规格			数量 / 盒
		开口大小	造口有效直径	袋子尺寸 (长 × 宽)	
M	12641	40mmø	最大 39mm	120mm × 110mm	30 个
L	12642	40mmø	最大 39mm	140mm × 130mm	30 个

附件用品

Mini Pad

入浴用垫子

- 特征**
- 适合于入浴等场景的造口保护
 - 肉色能有效隐匿造口

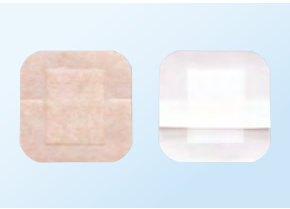

种类	商品编号	规格		数量 / 盒
		粘贴部尺寸	吸收部尺寸	
—	12651	100mm×100mm	65mm×50mm	30个

Urinary Bag

集尿袋

- 特征**
- 连接造口袋，最适合夜间集尿
 - 有逆流防止阀



种类	商品编号	规格			数量 / 盒
		袋子尺寸 (长 × 宽)	容量	主要对应商品	
—	12071	320mm×230mm (导尿管长度 1m)	2000mL	Procare 1-U/Uc Procare 2-U Biomax Urinary Pouch Biourine Super Biourine 小儿用 Procare 1-U	5个
1号	12072	320mm×230mm (导尿管长度 1m)	2000mL	Cellcare 1-U/Uc Cellcare 2-U Youcare-U/Uc Youcare 2-U	5个

Drainable Clip

结肠 / 回肠造口用封口夹

- 特征**
- ALCARE 引流式造口袋专用封口夹



种类	商品编号	规格 (主要对应商品)	数量 / 袋
—	90791	Cellcare 2-Df Youcare-D/Dc Youcare 2-D/Df Ilefine Procare 1-D/Dc Procare 2-D Biomax Drainable Pouch	200个

Connector Tube

尿路造口用连接管

- 特征**
- ALCARE 尿路造口袋专用连接管



种类	商品编号	规格 (主要对应商品)	数量 / 盒
A	19451	Procare 1-U/Uc Procare 2-U Biomax Urinary Pouch Biourine Super Biourine 小儿用 Procare 1-U	10根
B	19452	Cellcare 1-U/Uc Cellcare 2-U Youcare-U/Uc Youcare 2-U	10根

灌洗器配套用品

Coloclean PC

灌洗套装

- 特征**
- 配备有灌肠时及灌肠后所需的装置
 - 可收纳在附属的袋中，适合外出携带



种类	商品编号	规格 (套装内容)	数量 / 盒
套装	13401	洗涤液袋 : 1个 灌洗头 : 1个 Coloclean PC用底盘 : 1个 Coloclean PC用灌洗袖 : 5个 携带用袋 : 1个 Mini Pouch-K Super : 2个 Youcare-C : 2个	1套

Cellcare
肠造口护理用品

Youcare
肠造口护理用品

Procare
肠造口护理用品

其它
肠造口护理用品

Cellcare
尿路造口护理用品

Youcare
尿路造口护理用品

Procare
尿路造口护理用品

附件用品

灌洗器配套用品

Cellcare
肠造口护理用品

Youcare
肠造口护理用品

Procare
肠造口护理用品

其它
肠造口护理用品

Cellcare
尿路造口护理用品

Youcare
尿路造口护理用品

Procare
尿路造口护理用品

附件用品

灌洗器配套用品