



OAライト・プロ OA LIGHT-PRO

種類	商品コード NO.	規 格		1函 入数
		大腿周囲	膝周囲	
LL	18821	46~50cm	35~40cm	1コ
L	18822	42~46cm	34~39cm	1コ
M	18823	38~42cm	32~37cm	1コ
S	18824	35~38cm	31~35cm	1コ
SS	18825	32~35cm	29~33cm	1コ

※左右兼用です。
※サイズの選定は大腿周囲(膝蓋骨中心の上10cmの周径)を採寸し決定します。
膝周囲(膝蓋骨中心の周径)は目安としてください。
※2つのサイズにまたがる場合は、小さいサイズをお選びください。



ニーケア・PT KNEECARE-PT

種類	商品コード NO.	規 格		1函 入数
		大腿周囲	膝周囲	
3L	16151	49~54cm	38~41cm	1コ
LL	16152	45~49cm	35~40cm	1コ
L	16153	41~45cm	33~38cm	1コ
M	16154	37~41cm	32~36cm	1コ
S	16155	34~37cm	31~35cm	1コ

※左右兼用です。
※サイズの選定は大腿周囲(膝蓋骨中心の上10cmの周径)を採寸し決定します。
膝周囲(膝蓋骨中心の周径)は目安としてください。
※2つのサイズにまたがる場合は、小さいサイズをお選びください。



OAシームレス・プロ OA SEAMLESS-PRO

種類	商品コード NO.	規 格 (膝周囲)	1函 入数
SS-S	18832	31.0~35.0cm	1コ

※左右兼用です。
※サイズの選定は膝周囲(膝蓋骨中心の周径)を採寸し決定します。
※2つのサイズにまたがる場合は、小さいサイズをお選びください。



保温シームレスサポーター SEAMLESS SUPPORTER

種類	商品コード NO.	規 格 (膝周囲)	1函 入数
M	17051	34~38cm	1枚
S	17061	30~34cm	1枚
ロング	17071	32~40cm	1枚

※左右兼用です。
※サイズの選定は膝周囲(膝蓋骨中心の周径)を採寸し決定します。
※2つのサイズにまたがる場合は、小さいサイズをお選びください。
※膝以外の部位にも適応するため、実際の商品のサイズ表記には他の部位名が併記される場合があります。



OAインソール・キット OA INSOLE-KIT

種類	商品コード NO.	規 格		1函 入数
		足長	セット内容	
右	M 18771	25.0~26.5cm	サンドイッチインソール、 ラテラルウエッジ、 アーチパッド	1セット
	S 18772	23.5~25.0cm		1セット
	SS 18773	22.0~23.5cm		1セット
左	M 18781	25.0~26.5cm		1セット
	S 18782	23.5~25.0cm		1セット
	SS 18783	22.0~23.5cm		1セット

※2つのサイズにまたがる場合は、小さいサイズをお選びください。

アルケア株式会社

〒130-0013 東京都墨田区錦糸1-2-1 アルカセントラル19階
TEL.03-5611-7800(代表) FAX.03-5611-7825 <http://www.alcare.co.jp>

東京営業所 TEL.03-5638-8161 名古屋営業所 TEL.052-222-3860
首都圏東営業所 TEL.048-834-5614 大阪営業所 TEL.06-6337-2985
首都圏西営業所 TEL.045-472-7511 広島営業所 TEL.082-831-8777
札幌営業所 TEL.011-261-1721 福岡営業所 TEL.092-441-8372
仙台営業所 TEL.022-715-2733

INTERNATIONAL SALES DIVISION TEL.81-3-5611-7819

■アルケア医工学研究所 ■千葉工場 ■オストメイトサービスセンター

●本カタログの内容は平成22年9月現在のものです。
●商品の仕様およびデザインは、改良などにより予告なく変更することがあります。
●本カタログに掲載の写真は、実際の色とは多少異なる場合がありますので、ご了承ください。



この印刷物は、ESPAのシルバー基準に適合した地球環境にやさしい印刷方法で作成されています。ESPA:環境保護印刷推進協議会 <http://www.e3pa.com>



軽度OAに対応する
OA装具のエントリーモデル

オルソペディックケアソリューション

OAサポートプロダクトシリーズ

OAサポーターシリーズ ● OA SUPPORTER SERIES

OAライト・プロ
OAシームレス・プロ
OAインソール・キット
ニーケア・PT
保温シームレスサポーター

ALCARE

Innovative Solutions for
Best Care

すべてのOA患者様に、最適な装具を——

軽度OA患者様のニーズに応える、 アルケアの《OAサポートプロダクトシリーズ》。

変形性膝関節症(OA)患者様の増加に伴い、OA装具へのニーズが多様化する中、アルケアは従来の装具の問題点となっていた「患者様の使いやすさ」に着目。

日常生活の中で手軽に違和感なく着用でき、毎日使い続けられる装具を目指した《OAサポートプロダクトシリーズ》を開発しました。

OA装具療法の新しい選択肢、《OAサポートプロダクトシリーズ》が、軽度OA患者様のニーズに対応します。

■アルケアのOA装具ラインナップ

SOFT			HARD
1 膝全体を温かく包み込む 保温タイプ	2 快適な装着感を維持する フィット性重視タイプ	3 膝関節を支持する 安定・支持タイプ	4 3点支持で膝関節の動作を補助する 矯正タイプ
 保温シームレスサポーター ▶P6	 OAライト・プロ ▶P3	 OAシームレス・プロ ▶P4	 ニーケア・PT ▶P6
	 OAインソール・キット ▶P5	 ニーケア・OA ショート 2	 ニーケア・OA クロス 2
			 アンローダーワン

フロントオープンタイプで、抜群のフィット感。

OAライト・プロ

膝サポーター ● KNEE SUPPORTER



装着者自身がフィット感を調整できる
フロントオープンタイプの膝サポーターです。
軽量で通気性にも優れているため、
ストレスなく継続的な着用が可能です。



伸縮性の異なる素材により
膝関節周囲に適切にフィットする
ハイブリッド構造

非伸縮性素材

伸縮性素材

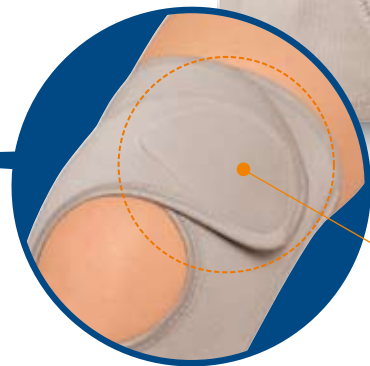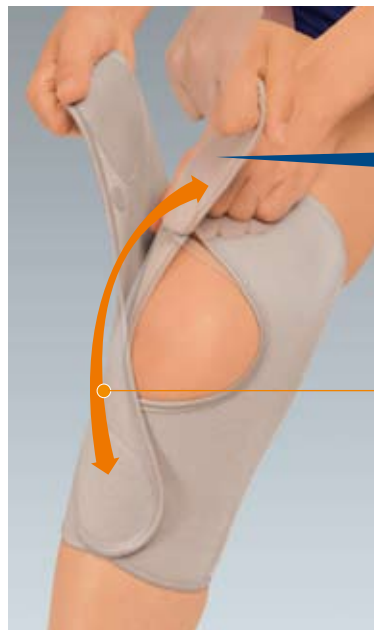

握力の弱い高齢者でもつかみやすい、
卵形の持ち手形状

締め付けに応じて、自然と膝関節周囲にフィット

適切かつ容易にフィット感を調整可能

伸縮性・非伸縮性の異なる素材を用いたハイブリッド構造のため、締め付けに応じて自然と膝関節周囲に適切にフィットします。さらに、つかみやすい卵形の持ち手形状により、適切かつ容易にフィット感の調整を行えます。

簡単装着で、段階的圧迫を実現。

OAシームレス・プロ

膝サポーター ● KNEE SUPPORTER

簡単に装着できるシームレスタイプの
膝サポーターです。
3段階の圧迫グラデーション機能により、
快適なフィット感と適切な圧迫を両立します。



編み糸の本数変化により
段階的な圧迫を与える

3段階の 圧迫グラデーション

圧迫パッド(強圧迫部)

中圧パッド(中圧迫部)

ベースサポーター(弱圧迫部)



装着が容易

違和感のある箇所に圧迫パッド(色の濃い部分)の向きを合わせて履くだけで、装着が完了します。

左右兼用

上下逆にすることで、左脚・右脚、内側・外側のどちらにも使用できます。



右膝・内側に違和感がある場合 左膝・内側に違和感がある場合

OA LIGHT PRO

OA SEAMLESS PRO

OAインソール・キット

足底板・INSOLE

誰でも容易に各パーツを設置・調節できる
カスタマイズ可能なOA用インソールです。
短時間・低コストで使用できる
手軽さを実現しました。

各パーツを上下のソールで挟み込む
サンドイッチ構造



サンドイッチ構造により各パーツがズレにくく、
長期間使用しても適切な効果を維持します。



パーツ位置をカスタマイズ可能

アーチパッドとラテラルウエッジは、面ファスナーで上下のソール
に接着するため、着脱可能です。パーツ位置を容易にカスタマイズ
できます。



※写真は右足に装着したイメージです。

OA INSOLE-KIT

ニーケア・PT


膝蓋腱保護用膝サポーター・KNEECARE-PT

大腿用・下腿用のベルトで
膝関節を的確に圧迫する

ダブルベルト構造

大腿用追加ベルト(オプション)により、
圧迫力を調整可能

ズレの少ないセミオープンタイプ

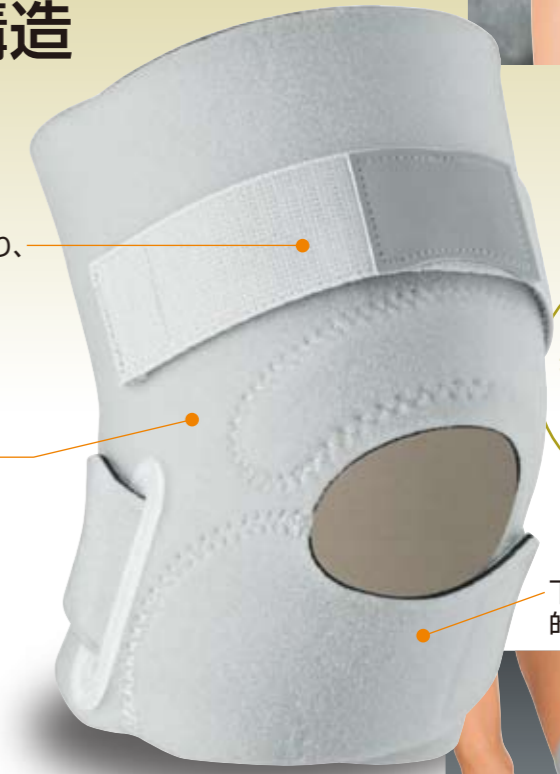

長さ約20cmの
コンパクト設計

下腿用クロスベルトで
的確に圧迫



コンパクト設計でありながら、的確な圧迫力。

より症状の軽いOA患者様に

保温シームレスサポーター

シームレスサポーター・SEAMLESS SUPPORTER

ウール混紡素材を使用し、優れた保温性を実現

S、M、L、ロングの4サイズ展開



SEAMLESS SUPPORTER

※写真はMサイズです。