

# ニーケア シリーズ

## Kneecare Series



膝サポーター  
Knee Supporter

- ニーケア・ACL
- ニーケア・MCL
- ニーケア・PCL
- ニーケア・クロスベルト
- ニーケア・サポート



### アルケア株式会社

東京都墨田区錦糸1-2-1 アルカセントラル19階 〒130-0013  
www.alcare.co.jp

お問い合わせ：コールセンター

フリーダイヤル **0120-770-863** 土・日・祝日を除く  
午前9:00～午後5:00

- 本カタログの内容は2024年4月現在のものです。
- 商品の仕様、デザインおよび価格は、改良や経済状況の変動などにより予告なく変更することがあります。
- 本カタログに掲載の写真は、実際の色とは多少異なる場合がありますので、ご了承ください。



この印刷物は、EPAのシルバー基準に適合した地球環境にやさしい印刷方法で作成されています  
EPA: 環境保護印刷推進協議会  
http://www.e3pa.com

# 膝関節の的確なサポート、操作性と快適性を追求した ラインアップです——

## ズレにくい

### 膝の動きへの追従性

#### リーフカット


膝の伸展屈曲運動で発生する膝周りの浮きを低減する独自の裁断設計です。



### 続く装着感

#### 着圧維持素材

本体生地は時間が経過しても装着圧が低下しにくくなりました。

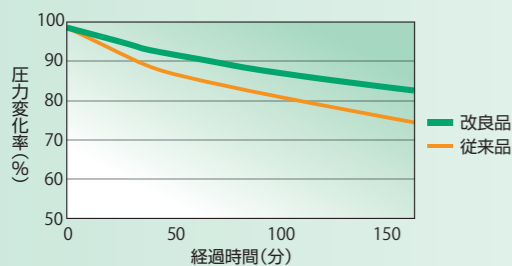

### ニーグリップ シリーズの主な機能

	前方 動揺抑制	内側 動揺抑制	後方 動揺抑制	側方 動揺抑制	大腿部 圧迫	膝蓋骨外側 動揺抑制
ACL	◎			○		
MCL		◎		○		
PCL			◎	○		
クロスベルト				◎	○	
サポート				○		
パテラ						◎




## 快適

### 軽量化


#### 薄手本体生地

本体生地は三層構造になっており、従来品と比べて全体で29%薄くなりました。

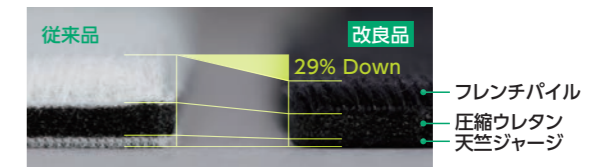

### アルミステー


幅を縮小し、約10%の軽量化を実現。断面形状を変更し、強度も保っています。

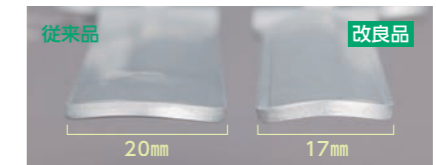

### 通気性の向上

#### 膝裏部のWラッセル生地

縦横に伸びる立体的なメッシュ素材。

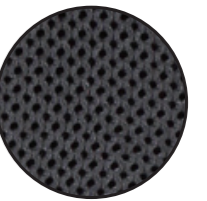

### 生地の反り返り低減

生地表面のフレンチパイルの起毛が短く、面ファスナーの着脱の繰り返しによる生地の劣化を低減。本体生地の反り返りが起きにくくなっています。

## 着脱しやすい

### 操作性の向上


#### アクティブフラップ

面ファスナーとフラップを異なる形状で組み合わせ、装着中には外的な力ではがれにくく、外す時にははがしやすい設計です。



### 伸ばしやすい素材

本体生地がより少ない力でも伸びやすくなりました。

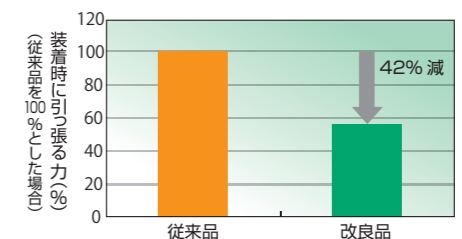

## ニーケア・ACL

前方制限付膝サポーター

下腿の前方動揺を抑制



## ニーケア・MCL

側方制限付膝サポーター

膝関節の内側動揺を抑制



## ニーケア・PCL

後方制限付膝サポーター

下腿の後方動揺を抑制



## ニーケア・クロスベルト

クロスベルト・側方制限付膝サポーター

膝関節の側方動揺をしっかり抑制し、さらに大腿部を適切に圧迫



装着しやすい設計  
(ロコモフラップ)

着脱操作性を重視し、持ちやすく力を入れやすいフラップ形状



前方動揺抑制：◎

側方動揺抑制：○

大腿部後面と下腿部前面の2点支持により、下腿の前方動揺を抑制



内側動揺抑制：◎

側方動揺抑制：○

大腿部外側、膝部内側、下腿部外側の3点支持により、膝関節の内側動揺を抑制



後方動揺抑制：◎

側方動揺抑制：○

大腿部前面、下腿部後面の2点支持により、下腿の後方動揺を抑制



側方動揺抑制：◎

大腿部圧迫：◎

クロスベルトがアルミステーの上を通り、膝関節の側方動揺をしっかり抑制。さらに大腿部前面を適切に圧迫



アルミステー

オフセットジョイント構造のアルミステーが膝関節の側方動揺と過伸展を抑制



アルミステー

オフセットジョイント構造のアルミステーが膝関節の側方動揺と過伸展を抑制



アルミステー

オフセットジョイント構造のアルミステーが膝関節の側方動揺と過伸展を抑制



アルミステー

オフセットジョイント構造のアルミステーが膝関節の側方動揺と過伸展を抑制

# ニーケア・サポート

側方制限付膝サポーター

膝の不安定性をサポートする  
ベーシックタイプ



商品概要

支持構造

ステー素材



側方動揺抑制：○

アルミステーが膝関節の側方動揺をサポート



アルミステー

オフセットジョイント構造のアルミステーが膝関節の側方動揺と過伸展を抑制



ニーケア・ACL Kneecare-ACL

種類	商品コード No.	規格		1函 入数
		大腿周囲	膝周囲	
3L	19171	49～54cm	38～41cm	1コ
LL	19172	45～49cm	35～40cm	1コ
L	19173	41～45cm	33～38cm	1コ
M	19174	37～41cm	32～36cm	1コ
S	19175	34～37cm	31～35cm	1コ



ニーケア・MCL Kneecare-MCL

種類	商品コード No.	規格		1函 入数	
		大腿周囲	膝周囲		
右	3L	19181	49～54cm	38～41cm	1コ
	LL	19182	45～49cm	35～40cm	1コ
	L	19183	41～45cm	33～38cm	1コ
	M	19184	37～41cm	32～36cm	1コ
	S	19185	34～37cm	31～35cm	1コ
左	3L	19191	49～54cm	38～41cm	1コ
	LL	19192	45～49cm	35～40cm	1コ
	L	19193	41～45cm	33～38cm	1コ
	M	19194	37～41cm	32～36cm	1コ
	S	19195	34～37cm	31～35cm	1コ



ニーケア・PCL Kneecare-PCL

種類	商品コード No.	規格		1函 入数
		大腿周囲	膝周囲	
3L	19201	49～54cm	38～41cm	1コ
LL	19202	45～49cm	35～40cm	1コ
L	19203	41～45cm	33～38cm	1コ
M	19204	37～41cm	32～36cm	1コ
S	19205	34～37cm	31～35cm	1コ



ニーケア・クロスベルト Kneecare-Crossbelt


種類	商品コード No.	規格		1函 入数
		大腿周囲	膝周囲	
LL	19311	46～50cm	35～41cm	1コ
L	19312	42～46cm	34～39cm	1コ
M	19313	38～42cm	32～37cm	1コ
S	19314	35～38cm	31～35cm	1コ
SS	19315	32～35cm	29～33cm	1コ

※他商品と丈の長さ、サイズ設定・規格が異なりますのでご注意ください。



ニーケア・サポート Kneecare-Support

種類	商品コード No.	規格		1函 入数
		大腿周囲	膝周囲	
3L	19211	49～54cm	38～41cm	1コ
LL	19212	45～49cm	35～40cm	1コ
L	19213	41～45cm	33～38cm	1コ
M	19214	37～41cm	32～36cm	1コ
S	19215	34～37cm	31～35cm	1コ

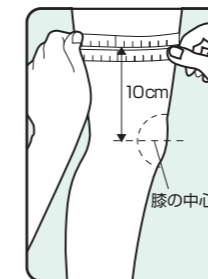

※サイズの選定は大腿周囲(膝蓋骨中心の上10cmの周径)を採寸し決定します。  
膝周囲(膝蓋骨中心の周径)は目安としてください。  
※両サイズにまたがる場合は、小さいサイズをお選びください。