

ニーケア・OA シリーズ

Kneecare-OA Series



膝サポーター Knee Supporter

- ニーケア・OA 1
- ニーケア・OA 2
- ニーケア・OA 3



快適

軽量化


薄手本体生地

本体生地は三層構造になっており、従来品と比べて全体で29%薄くなりました。



アルミステー


幅を縮小し、約10%の軽量化を実現。断面形状を変更し、強度も保っています。

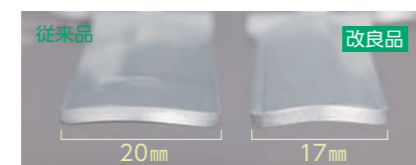

通気性の向上

膝裏部のWラッセル生地

縦横に伸びる立体的なメッシュ素材。

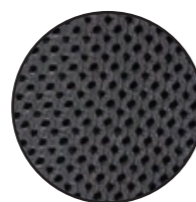

生地の反り返り低減

生地表面のフレンチパイルの起毛が短く、面ファスナーの着脱の繰り返しによる生地の劣化を低減。本体生地の反り返りが起きにくくなっています。

装着しやすい

着脱操作性


ロコモフラップ

面ファスナーの中央をくぼませて、持ちやすく、力を入れやすい形状です。



伸ばしやすい素材

本体生地がより少ない力でも伸びやすくなりました。

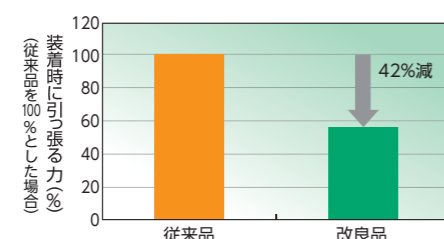

ニーケア・OA 1^{※1} Kneecare-OA 1


種類	商品コード No.	規格		1函入数
		大腿周囲	膝周囲	
LL	19261	46~50cm	35~41cm	1コ
L	19262	42~46cm	34~39cm	
M	19263	38~42cm	32~37cm	
S	19264	35~38cm	31~35cm	
SS	19265	32~35cm	29~33cm	

ニーケア・OA 2^{※1} Kneecare-OA 2

種類	商品コード No.	規格		1函入数
		大腿周囲	膝周囲	
LL	19241	46~50cm	35~41cm	1コ
L	19242	42~46cm	34~39cm	
右 M	19243	38~42cm	32~37cm	
S	19244	35~38cm	31~35cm	
SS	19245	32~35cm	29~33cm	
LL	19251	46~50cm	35~41cm	
L	19252	42~46cm	34~39cm	
左 M	19253	38~42cm	32~37cm	
S	19254	35~38cm	31~35cm	
SS	19255	32~35cm	29~33cm	

ニーケア・OA 3^{※1} Kneecare-OA 3

種類	商品コード No.	規格		1函入数
		大腿周囲	膝周囲	
LL	19221	46~50cm	35~41cm	1コ
L	19222	42~46cm	34~39cm	
右 M	19223	38~42cm	32~37cm	
S	19224	35~38cm	31~35cm	
SS	19225	32~35cm	29~33cm	
LL	19231	46~50cm	35~41cm	
L	19232	42~46cm	34~39cm	
左 M	19233	38~42cm	32~37cm	
S	19234	35~38cm	31~35cm	
SS	19235	32~35cm	29~33cm	

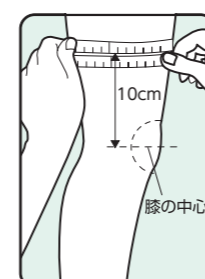

- ※1 ●サイズの選定は大腿周囲(膝蓋骨中心の上10cmの周径)を採寸し、決定します。膝周囲(膝蓋骨中心の周径)は目安としてください。
●2つのサイズにまたがる場合は、小さいサイズをお選びください。
- ※2 ●サイズの選定は膝周囲(膝蓋骨中心の周径)を採寸し、決定します。
●2つのサイズにまたがる場合は、小さいサイズをお選びください。

OA ライト・プロ^{※1} OA Light-Pro

種類	商品コード No.	規格		1函入数
		大腿周囲	膝周囲	
LL	18821	46~50cm	35~40cm	1コ
L	18822	42~46cm	34~39cm	
M	18823	38~42cm	32~37cm	
S	18824	35~38cm	31~35cm	
SS	18825	32~35cm	29~33cm	

OA シームレス・プロ^{※2} OA Seamless-Pro

種類	商品コード No.	規格		1函入数
		大腿周囲	膝周囲	
M-L	18831	32.0~37.5cm		1コ
SS-S	18832	31.0~35.0cm		

装着のしやすさと快適性・ズレにくさを追求した新しいラインアップです——

ズレにくい

膝の動きへの追従性


リーフカット

膝の伸展屈曲運動で発生する膝周りの浮きを低減する独自裁断設計です。



ロコモパッド


膝の屈曲時に発生する膝下部のくぼみに合わせた形状で、さらにパッドカバーにすべりにくいナノファイバーを使用することでズレを低減します。

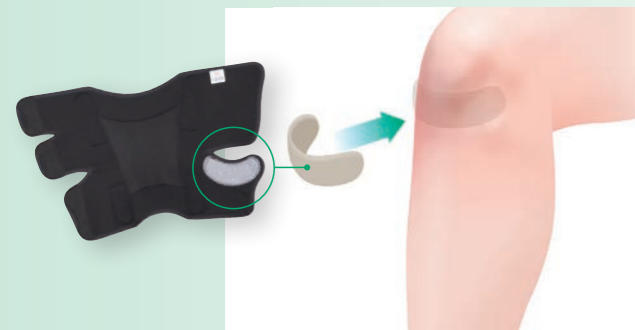

続く装着感

着圧維持素材

本体生地は時間が経過しても装着圧が低下しにくくなりました。

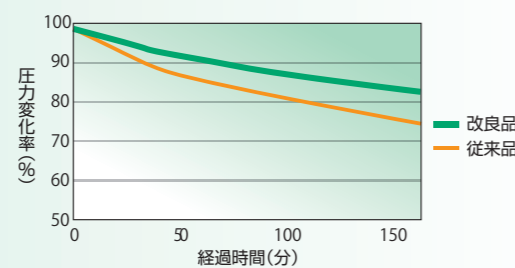

商品概要

ニーケアー・OA 1


側方制限付膝サポーター

“ズレ”を解決する、ベーシックタイプ



支持構造

側方支持: ◎

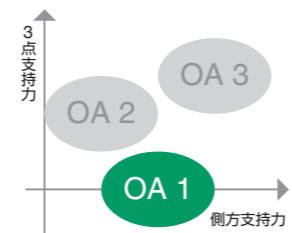

ステータ素材

アルミステー

オフセットジョイント構造のアルミステーが膝関節の側方動揺と過伸展を抑制

ニーケアー・OA 2


クロスベルト・側方支持付膝サポーター

装着しやすい3点支持で膝関節をサポート



側方支持: ○

3点支持: ◎

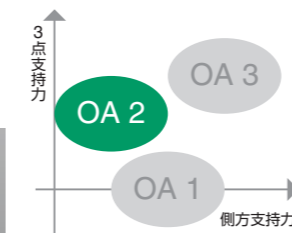

スパイラルステー

網目状のプラスチックステーは、軽く、薄く、動きに追従する柔軟性があり、支持性を保持

ニーケアー・OA 3


クロスベルト・側方制限付膝サポーター

アルミステーと3点支持で膝関節の動揺をしっかり抑制



側方支持: ◎

3点支持: ◎

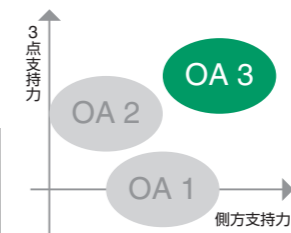

アルミステー

オフセットジョイント構造のアルミステーが膝関節の側方動揺と過伸展を抑制

OAライト・プロ

膝サポーター

快適性と簡便性を追求



シンプルなフロントオープンタイプで装着が簡便。伸縮性の異なる素材のハイブリッド構造でフィット性に優れ、ストレスなく継続的な装着が可能



OAシームレス・プロ

膝サポーター

3段階の圧迫構造



編み糸の本数変化により3段階の圧迫を実現。膝周囲の適度な圧迫と快適なフィット感を両立しました。左右兼用で内側・外側にも使用可能

