



キャストカッター 匠・II Cast Cutter Takumi-II

種類	商品コードNo.	規格(セット内容)	1函入数	メーカー希望 小売価格(本体価格)
—	17281	本体、ACアダプタII、着脱電源コード、 カッターブレード 匠、六角レンチ	1セット	¥303,050(¥275,500)

一般医療機器/電動式ギブスカッター/  
製造販売届出番号：13B1X00306N10298



カッターブレード 匠 Cutter Blade Takumi

種類	商品コードNo.	規格(直径)	1函入数	メーカー希望 小売価格(本体価格)
—	17282	61.0mm	1枚	¥7,700(¥7,000)

一般医療機器/ギブスカッター用刃/  
製造販売届出番号：13B1X00306G10972

※必ずカット対象のキャスト材に関する、注意事項等情報をご確認のうえご使用ください。

ギブス生活を応援するサポートグッズのご紹介

快適ギブス生活

何かと不自由なギブス固定中の生活が少しでも快適であるために。アルケアでは、一人ひとりの快適なギブス生活を応援する、サポートグッズを揃えています。

快適ギブス生活

検索




<http://www.alcare.co.jp/castsupport/>



キャストサスペンダー

上肢全体を良肢位に保持できるギブス専用の腕つり。

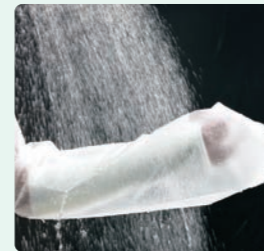

シャワーカバー

ギブスにかぶせてシャワーの水をガード。面倒な準備は一切不要な防水カバー。



キャストサンダル

簡単装着でスムーズな歩行をサポートする歩行用キャストサンダル。

ほか



快適な操作から、  
笑顔が生まれる。

製造販売元

ミスホ株式会社

〒113-0033 東京都文京区本郷3-30-13

販売元

**ALCARE**

アルケア株式会社


東京都墨田区錦糸1-2-1 アルカセントラル19階 〒130-0013  
TEL.03-5611-7800(代表) FAX.03-5611-7825  
[www.alcare.co.jp](http://www.alcare.co.jp)

お問い合わせ：コールセンター

フリーダイヤル **0120-770-863**

土・日・祝日を除く  
午前9:00～午後5:00

●本カタログの内容は2023年6月現在のものです。  
●商品の仕様、デザインおよび価格は、改良や経済状況の変動などにより予告なく変更することがあります。  
●本カタログに掲載の写真は、実際の色とは多少異なる場合がありますので、ご了承ください。

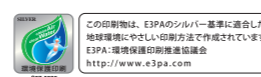

キャストカッター  
Cast Cutter

# 施術者も患者さんも、 ストレスのないギブスカッターを。

《キャストカッター 匠・II》は、ハイパワーの切削力と、高い操作性による  
使いやすさを実現。キャストの素材を問わず、簡単にスピーディーな除去が可能です。



## 高振動サイクルだから、 キャスト素材を容易にカット

高振動サイクル(14400サイクル/分：無負荷時)のハイパワー  
モデルで、キャスト素材を容易にカットできる優れた切削力  
です。患者様が不安を感じやすいキャストカット時の、心理的  
ストレスの軽減に貢献します。




## 静音設計で、 不快音を抑制

静音小型モーターが、操作時に発生する機械音を最小限に  
とどめます。キャストカット時の音による患者様の不安を軽減  
します。



## 安定性に優れ、 使いやすい設計

重量は約1kg。力を入れなくてもキャストに刃が入りやすい  
適度な重量設計です。また、グリップは握りやすくフィット性に  
優れたウェーブ形状。グリップと刃の位置が近く、さらに重心  
を中心より前(刃)側にすることで、ブレにくく、しっかり安定した  
無理のないカットが可能です。

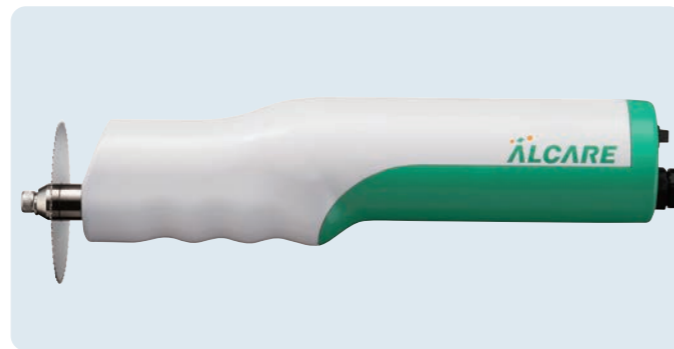

**取り扱いのご注意** カット時における、刃とキャストの摩擦熱にご注意ください。

キャスト除去の際は、刃を一カ所にとどめずカットしてください。一カ所にとどめると、キャストとの摩擦で高温の熱が発生し、熱傷のおそれがあります。



### 替刃

**カッターブレード 匠**  
キャストカッター 匠・II専用  
の交換用替刃を別売でご  
用意しております。  
製造販売届出番号  
13B1X00306G10972

### 仕様一覧表

販売名	キャストカッター 匠・II
製造販売届出番号	13B1X00306N10298
商品コード	17281
JANコード	4946329172812
類別	機械器具 40 医療用のこぎり
医療機器のクラス分類	一般医療機器
一般的名称	電動式ギブスカッター
JMDNコード	16340000
作動環境	周囲温度：10～35℃、相対湿度：30～75%、 気圧：700～1060hPa
輸送および 保管環境	周囲温度：0～50℃、相対湿度：10～85%（結露なきこと）、 気圧：700～1060hPa
電源	AC100V 50-60Hz
電源入力	130VA
電撃に対する保護	クラスI B形装着部
作動モード	非連続作動(最大作動時間8分、最小休止時間120分)
振動サイクル	14400サイクル/分±10% (無負荷時)
電源コード	着脱式 3m
外形寸法	本体：46mm×288mm×55mm ACアダプタII：90mm×189mm×46mm
質量	本体(コントロールケーブル含む)：約0.8kg、 ACアダプタII：約0.7kg、着脱電源コード：約0.4kg
付属品	ACアダプタII：1台、カッターブレード 匠：1枚、六角レンチ(サイズ4)：1本、 着脱電源コード：1本、取扱説明書：1部

### 規格適合情報

#### 製品規格への適合

本製品は、JIS T 0601-1：2017 医用電気機器-第1部：基礎安全  
及び基本性能に関する一般要求事項に適合しております。

#### EMC規格への適合

本製品は、JIS T 0601-1-2：2018 医用電気機器-第1-2部：  
基礎安全及び基本性能に関する一般要求事項-副通則：電磁妨害  
-要求事項及び試験に適合しております。