



デュアプレス・テンションガイド Dualpress - Tension Guide



デュアプレス・テンションガイド Dualpress-Tension Guide

種類	商品コード No.	規格	1函入数	メーカー希望 小売価格(本体価格)
—	21381	【適応】 足首周囲：18~32cm 【パディング包帯】 10.0cm×6.5m (伸長 1巻) 【ガイド付き 弾性 包帯】 10.0cm×8.2m (伸長 1巻)	1セット	¥3,520 (¥3,200)

外すときまで、
巻いた時の状態を維持する
自着性包帯キット。

自着性包帯キット Cohesive Bandage Kit



アルケア株式会社

東京都墨田区錦糸1-2-1 アルカセントラル19階 〒130-0013
TEL.03-5611-7800(代表) FAX.03-5611-7825
www.alcare.co.jp

お問い合わせ：コールセンター

フリーダイヤル **0120-770-863** 土・日・祝日を除く
午前9:00~午後5:00

●本カタログの内容は2023年2月現在のものです。
●商品の仕様、デザインおよび価格は、改良や経済状況の変動などにより予告なく変更することがあります。
●本カタログに掲載の写真は、実際の色とは多少異なる場合がありますので、ご了承ください。



《デュアプレス・テンションガイド》 自着性包帯キット

適切な圧迫圧を維持。 巻き直しの手間が少ない2層式包帯。

異なる伸縮性と自着性をもった2層の包帯で、安定した圧迫圧を維持します。
巻きやすく緩みにくいので、巻き直しの手間が少ない安定した圧迫固定が行なえます。

2層の包帯の特徴


●パディング包帯+ガイド付き弾性包帯

インナーに片面自着性・弾性糸を用いたショートストレッチのパディング包帯、
アウトターに両面自着性のロングストレッチのガイド付き弾性包帯を巻きつけ、
ズレ・緩みのない安定した圧迫を行います。

パディング包帯 片面自着

伸長率：60%(ショートストレッチ)

保護 + 圧迫 + ズレ防止

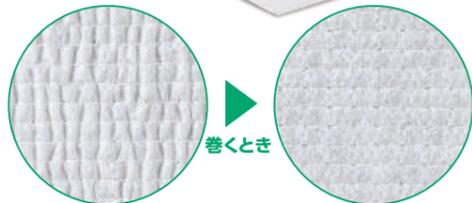


非伸縮の不織布に伸縮糸を編み込んでおり、
不織布が伸びた状態で巻きます。

ガイド付き弾性包帯 両面自着

伸長率：150%(ロングストレッチ)

巻き緩み防止

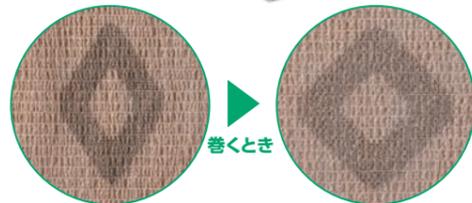

伸縮性に富んだ弾性包帯で、ひし形のガイド
が正方形になった状態で巻きます。

装着はこんなに簡単

●巻きやすさに配慮した設計

自着性により装着時に手を離しても転がり
巻きほぐれることはありません。
包帯になれていない方でも自身のペースで
巻くことができます。



●使う分だけ手でカット

インナー層、アウトター層とも道具を使わず
手でカットすることができます。
下肢の長さや太さによらず、適正な位置で
巻き終わることができます。



装着中の安定性

●圧迫効果を持続可能

2層の包帯同士が自着し、ズレない・緩ま
ないので圧迫圧を維持できます。
立ち仕事の方やご自身での巻き直しができ
ない方など、次のタイミングまで巻き崩れ
ることなく、巻いた状態を維持します。

