

フィットキュア®・ランバー装着例



まえ



うしろ



よこ

簡単なギプス治療でギプス生活に笑顔を

Fit Cure

【フィットキュア】

カバー付きキャストティングシステム

Wearable Cast～ギプス固定のストレスフリーを目指して～

独自形状のキャストステー + 専用のステーカバー

Fit：ぴったり合う、適合する + Cure：治療する、硬化する

Speedy


即時固定

Simple

簡単操作

Comfortable

装着快適性

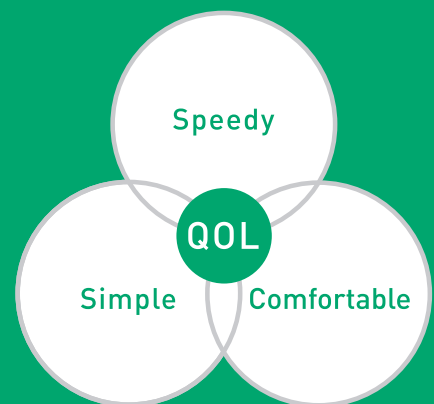

ALCARE

アルケア株式会社

東京都墨田区錦糸1-2-1 アルカセントラル19階 〒130-0013
www.alcare.co.jp

●本カタログの内容は2025年7月現在のものです。
●商品の仕様、デザインおよび価格は、改良や経済状況の変動などにより予告なく変更することがあります。
●本カタログに掲載の写真は、実際の色とは多少異なる場合がありますので、ご了承ください。

お問い合わせ：コールセンター

フリーダイヤル 0120-770-863 土・日・祝日を除く
午前9:00～午後5:00



この印刷物は、EPAのシリアル基準に適合した
地球環境にやさしい印刷方法で作成されています
EPA・環境省認定の環境基準適合
http://www.ejpa.com

ALCARE

つなぐ手あて、ひらくケア。

フィットキュア®・ランバー Fit Cure-Lumbar



簡単なギプス治療で、
ギプス生活に笑顔を。

カバー付きキャストティングシステム
Casting System with Cover

《フィットキュア®・ランバー》カバー付きキャストリングシステム

腰椎の的確な可動域制限と快適な装着感を実現し、
長期間の固定をサポートします。

腰の形状に合わせた **キャストステー** + **ステーカバー** だから、
その人にフィットした外固定がその場ですぐに行えます。



キャストステーをステーカバーに入れてスピーディーな処置が可能



キャストステーとインナーベルト構造により 腰部固定に必要な機能を搭載

腰椎の「伸展+回旋」を抑制するキャストステー構造

専用キャストステーとステーカバーが胸郭から骨盤の体側面まで覆う形状のため、腰椎の伸展と回旋を的確に抑制できます。



体幹の保持状態をサポートするベルト構造

伸縮機能を持つ腰部インナーベルトが腹圧を高め、体幹の保持状態をサポートします。



固定期間をできるだけ快適に

簡単操作で着脱しやすいベルト構造



ステー接触部にクッション性のある材料を使用し、 硬いステーの当たりを軽減します。



肌側素材に通気性と蒸散性の高い生地を使用し、内部のムレを防ぎます。

「水濡れ」「蒸れ」のストレス低減に向けて、高速乾・高通気の生地を使用しています。

